

MANUAL DE USUARIOS



SISTEMA DE GESTIÓN DE USUARIOS Y CONTROL DE SOLICITUDES DE EXAMENES, MUESTRAS, RESPUESTAS - L.A.P.E.

Laboratorio de Anatomía Patológica Echeverría



Universidad Luterana Salvadoreña

Práctica Profesional Informática

Ciclo II 2025

El Salvador San Salvador



Desarrollo de sistema de gestión de usuarios y control de solicitud de exámenes, muestras y respuestas L.A.P.E. laboratorio de Anatomía Patológica Echeverría by Universidad Luterana Salvadoreña. Manual de usuario por Jhonatan Castillo, Mario Rodas, Álvaro Castillo, Raúl Mendoza tiene licencia CC BY-NC-SA 4.0 para ver una copia de esta licencia visite <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Única edición.

San Salvador, diciembre de 2025

Impreso en El Salvador.

El contenido de este documento es estrictamente con fines educativos bajo estándares y lineamientos de la Universidad.

Editores:

Jhonatan Bladimir Castillo

Mario Enrique Rodas

Álvaro Ernesto Castillo

Raúl Ernesto Mendoza

Corrección de contenido: Licda. Ana Lissette Girón de Bermúdez

Índice

Introducción -----	1
Objetivos -----	2
Login de Acceso y Recuperación de Contraseña -----	3
Panel del Sistema -----	7
Modulo Gestión de Doctores -----	8
Modulo Gestión de Pacientes -----	10
Módulo de Gestión de Pacientes Personas -----	10
Módulo de Gestión de Pacientes Mascotas -----	13
Módulo de Biopsias -----	14
Módulo de Biopsias Persona -----	17
Creación de Biopsia Normal Persona -----	20
Creación de Biopsia Lavado Persona -----	23
Módulo de Biopsias Mascotas -----	27
Creación de Biopsia Normal Mascota -----	29
Creación de Biopsia Lavado Mascota -----	34
Módulo de citologías -----	38
Creación de Citología -----	41
Citologías Normales -----	42
Citologías Liquidas -----	45
Citologías Especiales -----	48
Módulo de Gestión de Listas -----	51
Centro de Ayuda -----	56
Créditos del Sistema -----	57

Ilustración 1 Login acceso.....	3
Ilustración 2 Mensaje error, contraseña invalida	4
Ilustración 3 ¿Olvidaste la contraseña?	4
Ilustración 4 Envío de enlace de recuperación.	5
Ilustración 5 Recepción de link cambio contraseña	5
Ilustración 6 Reestablecer contraseña.....	6
Ilustración 7 Cambio y confirmación de contraseña.....	6
Ilustración 8 Panel principal del sistema.	7
Ilustración 9 Modulo gestión de doctores.....	8
Ilustración 10 Administración de doctores.	8
Ilustración 11 Información general de doctores.....	9
Ilustración 12 Modulo gestión de pacientes.	10
Ilustración 13 Modulo gestión de pacientes personas	11
Ilustración 14 Filtro de búsqueda y detalle del paciente.	11
Ilustración 15 Detalle del paciente.	12
Ilustración 16 Modulo gestión de pacientes Mascotas	13
Ilustración 17 Gestión de Mascotas.....	13
Ilustración 18 Detalle mascota.	14
Ilustración 19 Módulo de biopsias.....	15
Ilustración 20 Filtro de búsqueda de biopsia.....	16
Ilustración 21 Vista detalle de biopsia.....	16
Ilustración 22 Biopsia personas.....	17
Ilustración 23 Vista detalle de biopsia personas.	17
Ilustración 24 Filtro de biopsia personas	18
Ilustración 25 Vista general de biopsias de personas.	18
Ilustración 26 Detalle de biopsia persona.....	19
Ilustración 27 Creación de biopsia normal persona.	20
Ilustración 28 Selección de biopsia normal o liquida.....	20
Ilustración 29 Nueva biopsia persona.....	21
Ilustración 30 Búsqueda de plantilla.....	22
Ilustración 31 Selección de plantilla.	22
Ilustración 32 Selección de acción guardar biopsia.	23
Ilustración 33 Selección de biopsia lavado persona.....	23
Ilustración 34 Nueva biopsia persona.....	24
Ilustración 35 Búsqueda de plantilla.....	25
Ilustración 36 Selección de plantilla.	26
Ilustración 37 Selección de acción guardar biopsia.	26
Ilustración 38 Módulo de biopsias mascotas.....	27
Ilustración 39 Detalle de cantidad de biopsias.....	27
Ilustración 40 Filtro de biopsias.	28
Ilustración 41 Acción ver biopsia.	28
Ilustración 42 Detalle de la biopsia.	29
Ilustración 43 Creación de biopsia normal de mascota.	29

Ilustración 44 Selección de tipo de biopsia normal.	30
Ilustración 45 Nueva biopsia normal mascota.	31
Ilustración 46 Búsqueda de plantilla.	32
Ilustración 47 Selección de plantilla.	33
Ilustración 48 Selección acción guardar biopsia.	33
Ilustración 49 Selección de biopsia lavado mascota.	34
Ilustración 50 Nueva biopsia mascota.	35
Ilustración 51 Búsqueda de plantilla.	36
Ilustración 52 Selección de plantilla.	37
Ilustración 53 Selección de acción guardar biopsia.	37
Ilustración 54 Módulo de citologías.	38
Ilustración 55 Detalle de cantidad de biopsias.	38
Ilustración 56 Filtros y detalle de citologías.	39
Ilustración 57 Vista general de citologías personas.	39
Ilustración 58 Detalle de citología.	40
Ilustración 59 Creación de citología.	41
Ilustración 60 Selección de citología normal, líquida, especial.	41
Ilustración 61 Citología normal.	42
Ilustración 62 Nueva citología persona.	43
Ilustración 63 Búsqueda y selección de plantilla.	44
Ilustración 64 Selección de acción guardar citología.	44
Ilustración 65 Citología líquidas.	45
Ilustración 66 Nueva citología persona.	46
Ilustración 67 Búsqueda y selección de plantilla.	47
Ilustración 68 Selección de acción guardar citología.	47
Ilustración 69 Citologías especiales.	48
Ilustración 70 Nueva citología persona.	49
Ilustración 71 Búsqueda y selección de plantilla.	50
Ilustración 72 Selección de acción guardar citología.	50
Ilustración 73 Modulo gestión de plantillas.	51
Ilustración 74 Selección de plantilla.	51
Ilustración 75 Plantilla biopsia.	52
Ilustración 76 Selección plantilla citologías.	53
Ilustración 77 Selección de impresión de sobres.	53
Ilustración 78 Impresión de sobres doctor.	54
Ilustración 79 Ejemplo de impresión de sobre doctor.	54
Ilustración 80 Selección de impresión sobre doctor y paciente.	54
Ilustración 81 Ejemplo de impresión de sobre doctor y paciente.	55
Ilustración 82 Impresión de sobres clientes especiales.	55
Ilustración 83 Ejemplo impresión de sobre especiales.	55
Ilustración 84 Centro de Ayuda.	56
Ilustración 85 Videos de apoyo del sistema.	56
Ilustración 86 Créditos del sistema.	57

Ilustración 87 Créditos y manuales.....	57
---	----

Introducción

El presente manual es una guía para el uso del sistema de gestión de usuarios y control de solicitud de exámenes, muestras y respuestas L.A.P.E. Este documento a sido diseñado especialmente para ofrecer al usuario una orientación detallada sobre las funcionalidades y características del sistema al que tienen acceso. A lo largo de esta guía se explicarán los procesos esenciales para la gestión eficiente de los diferentes módulos que son clave para la operatividad y funcionalidad del laboratorio.

El propósito principal de este manual es facilitar el uso del sistema, permitiendo un manejo organizado y seguro de la información, así como optimizar la gestión diaria de las actividades del laboratorio. A treves de pasos claros y ejemplos prácticos, esta guía busca asegurar que todas las herramientas disponibles se utilicen de manera efectiva contribuyendo a la operatividad eficaz del laboratorio.

Se espera que ese manual sea un recurso valioso en la práctica diaria de los usuarios, ayudándoles a maximizar el potencial del sistema y mejorar la calidad del servicio ofrecido.

Objetivos

Objetivo General

Proporcionar una guía clara y detallada que permita al usuario comprender y utilizar eficazmente las funcionalidades del sistema de gestión de usuarios y control de solicitud de exámenes, muestras y respuestas L.A.P.E., optimizando la administración de cada módulo presentado en el sistema.


Objetivos Específicos

- Presentar de forma detallada los pasos necesarios para ingresar al sistema, gestionar los módulos y realizar búsquedas eficientes, garantizando un manejo organizado y preciso de la información del laboratorio de anatomía patología Echeverría.
- Describir cada procedimiento para realizar registros de usuarios, doctores, pacientes, así como la gestión de listas alojadas en los diferentes módulos facilitando así el control y creación de biopsias y citologías relacionadas a los procesos del laboratorio.
- Facilitar las instrucciones sobre el módulo de ayuda y los tutoriales de apoyo, asegurando que el usuario pueda solventar sus dudas y aprovechar todas las funciones del sistema de manera independiente.

Login de Acceso y Recuperación de Contraseña

Abra el navegador de su preferencia y e ingrese con el siguiente URL <http://127.0.0.1:8000/login> en pantalla se mostrará un formulario donde debe de ingresar las credenciales asignadas (usuario y contraseña) una vez ingresados los campos correspondientes debe de hacer clic en ingresar.


Ilustración 1 Login acceso

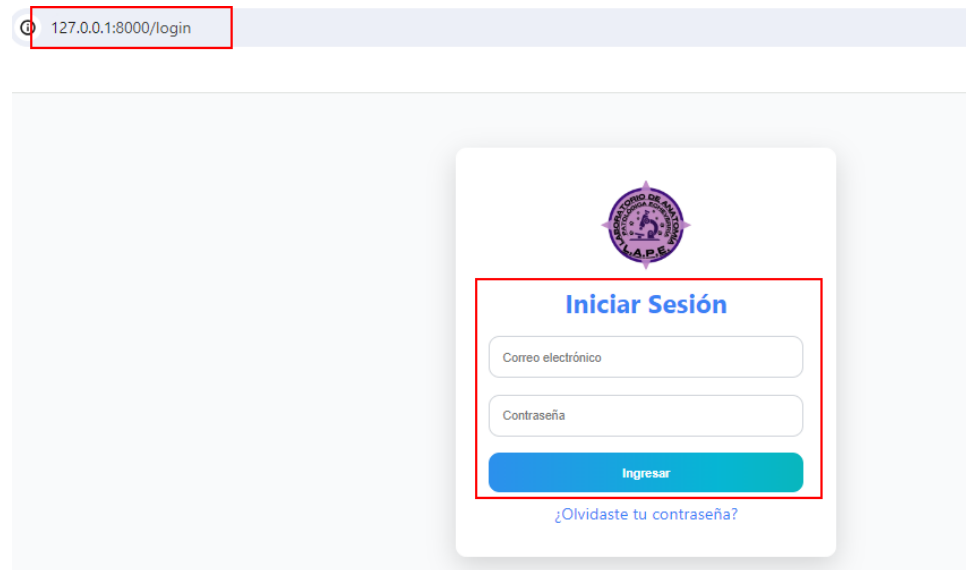

The image shows a web browser window with the address bar displaying '127.0.0.1:8000/login'. The main content area displays a login form for the 'A.P.E.' system. The form is white with a blue border and features the A.P.E. logo at the top. Below the logo, the title 'Iniciar Sesión' is displayed in blue. There are two input fields: 'Correo electrónico' and 'Contraseña'. Below these fields is a blue button labeled 'Ingresar'. At the bottom of the form, there is a link that says '¿Olvidaste tu contraseña?'.

En caso la contraseña se haya colocado de manera errónea se mostrará un mensaje “Estas credenciales no coinciden con nuestros registros”

Ilustración 2 Mensaje error, contraseña invalida

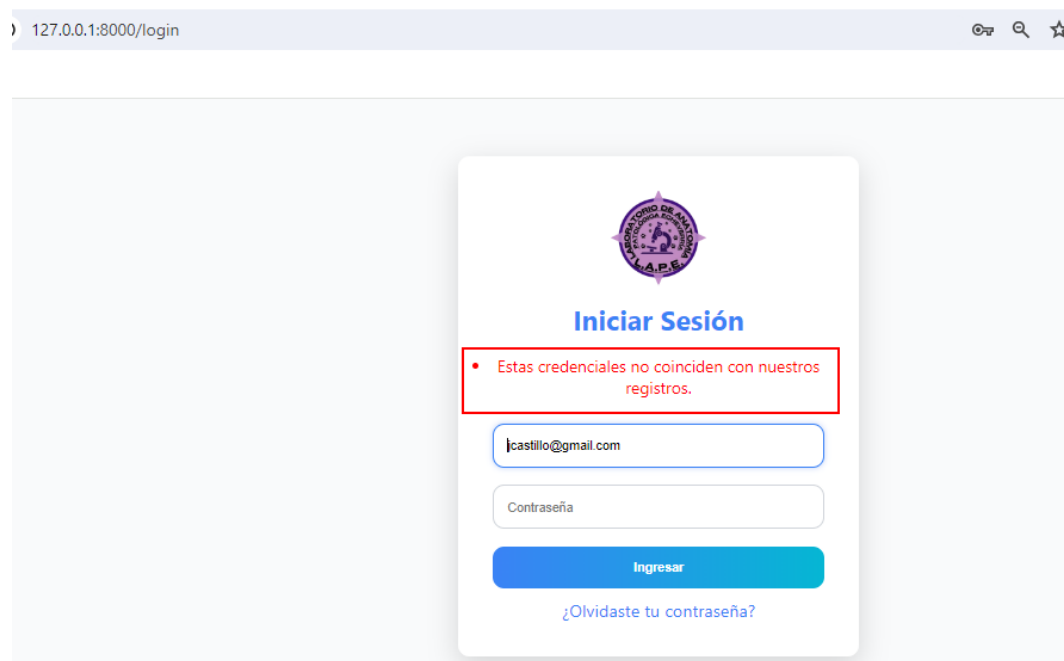


The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "127.0.0.1:8000/login". The page features a login form with the following elements:

- A purple circular logo at the top center with the text "INSTITUTO DE INVESTIGACIONES C.A.P.E." around a central emblem.
- The title "Iniciar Sesión" in blue text.
- A red-bordered box containing an error message: "• Estas credenciales no coinciden con nuestros registros."
- A text input field containing the email address "jcastillo@gmail.com".
- A text input field labeled "Contraseña".
- A blue button labeled "Ingresar".
- A link labeled "¿Olvidaste tu contraseña?" below the button.

En dado caso no recuerde las credenciales puede hacer uso de la opción de ¿Olvidase tu contraseña? En esta opción podrá resetear su contraseña colocando una nueva.


Ilustración 3 ¿Olvidaste la contraseña?

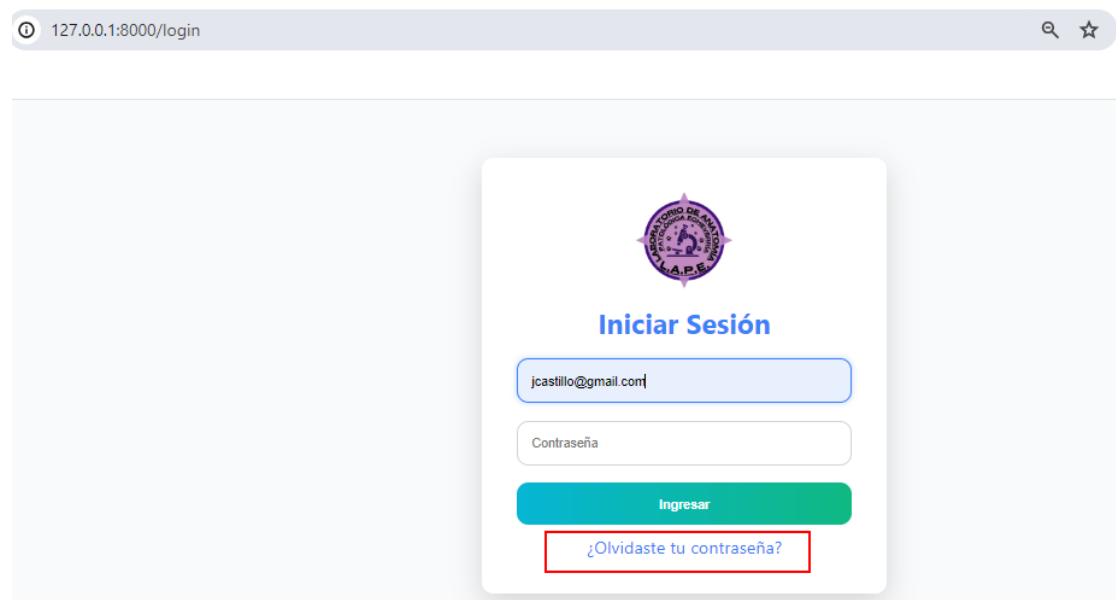

The screenshot shows the same login page as in Illustration 2. The elements are identical, but the link "¿Olvidaste tu contraseña?" is now highlighted with a red border, indicating it is the focus of the illustration.


En donde únicamente debes de colocar tu usuario en este caso tu correo electrónico y darle en la opción enviar enlace de recuperación.

Ilustración 4 Envío de enlace de recuperación.

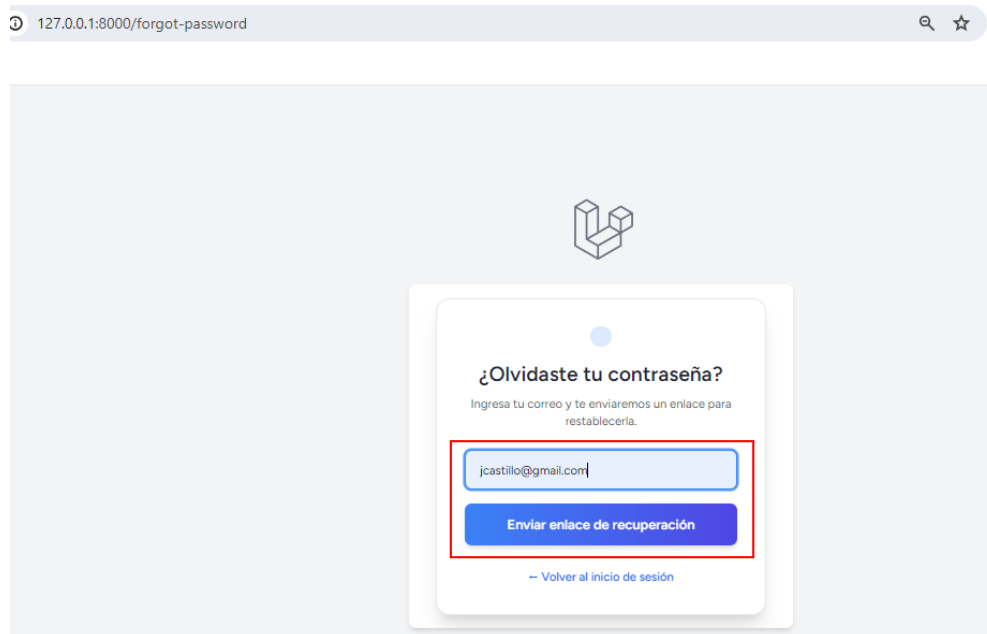


Debes de ir a tu correo electrónico que colocaste y verificar el correo recibido con el enlace para resetear la contraseña recibirás algo similar a esto:

Ilustración 5 Recepción de link cambio contraseña

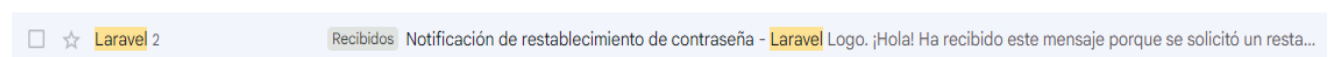

En donde puedes dar clic al botón reestablecer la contraseña o copiar la URL de la parte inferior

Ilustración 6 Reestablecer contraseña

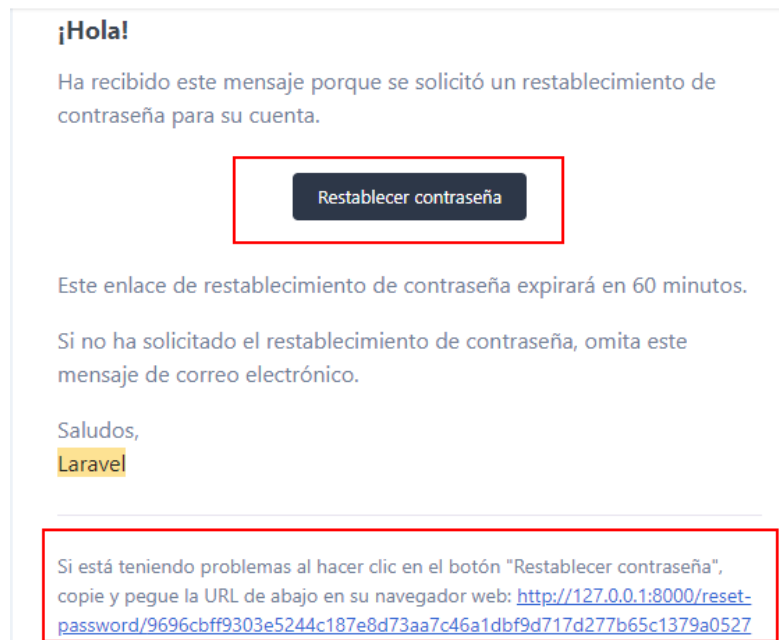

El cual lo dirigirá a una pantalla donde puede cambiar su contraseña, al cambiarla deberá de confirmar y presionar el botón reestablecer contraseña.

Ilustración 7 Cambio y confirmación de contraseña

127.0.0.1:8000/reset-password/9696cbff9303e5244c187e8d73aa7c46a1dbf9d717d277b65c1379a0527b17a1?email=bladimircastillo



Restablecer Contraseña

Ingresa tu correo y tu nueva contraseña para actualizar tu cuenta.

Correo electrónico

Nueva contraseña

Confirmar contraseña


[Restablecer contraseña.](#)

Panel del Sistema

Al ingresar tus credenciales de forma correcta recibirás un mensaje de “Bienvenido al panel del sistema” en esta pantalla encontraras los diferentes módulos como lo son gestión de doctores, gestión de pacientes, gestión de biopsias, gestión de citologías y la gestión de listas. Así como también en la parte superior derecha el usuario logueado y la opción de cerrar la sesión.


Para este nuevo sistema se han separado las opciones por módulos teniendo una mejor organización de la información, asegurando una mayor eficiencia y operatividad en los flujos relacionados al laboratorio de anatomía patología Echeverría.

Ilustración 8 Panel principal del sistema.

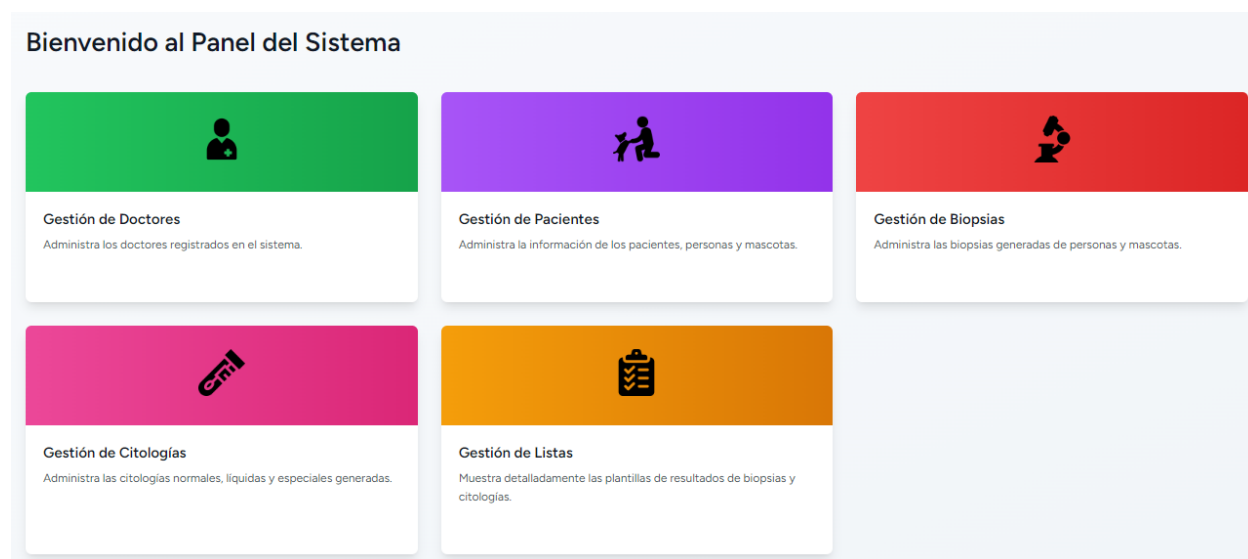


Modulo Gestión de Doctores

Ilustración 9 Modulo gestión de doctores

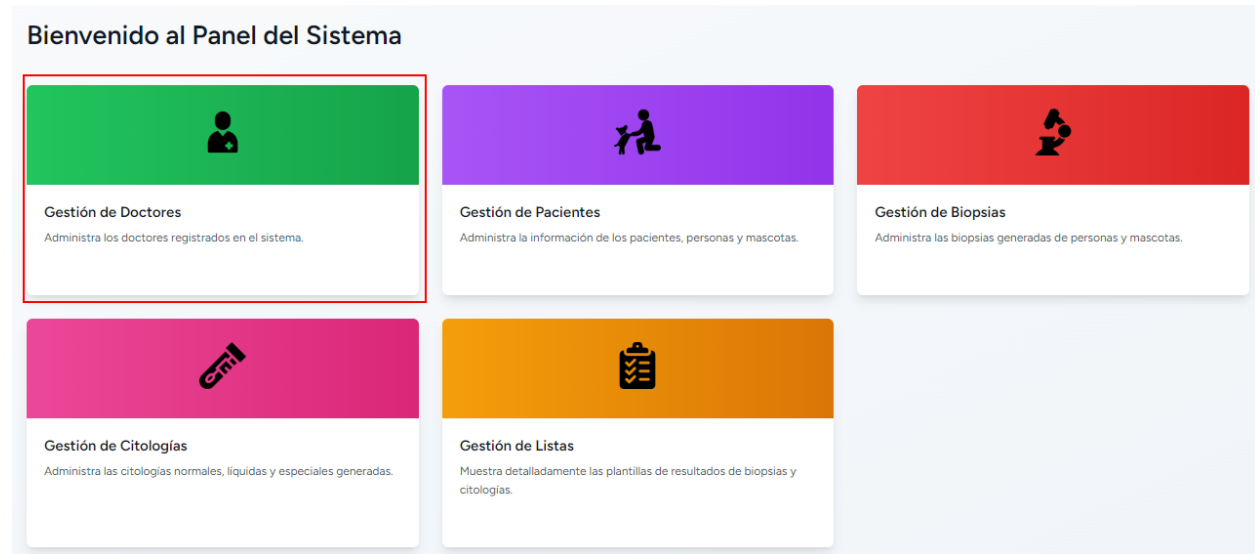

En este Modulo podrás visualizar a todos los doctores/clientes del laboratorio, para el rol de empleado únicamente podrás visualizarlos sin realizar ningún tipo de acción.

Ilustración 10 Administración de doctores.

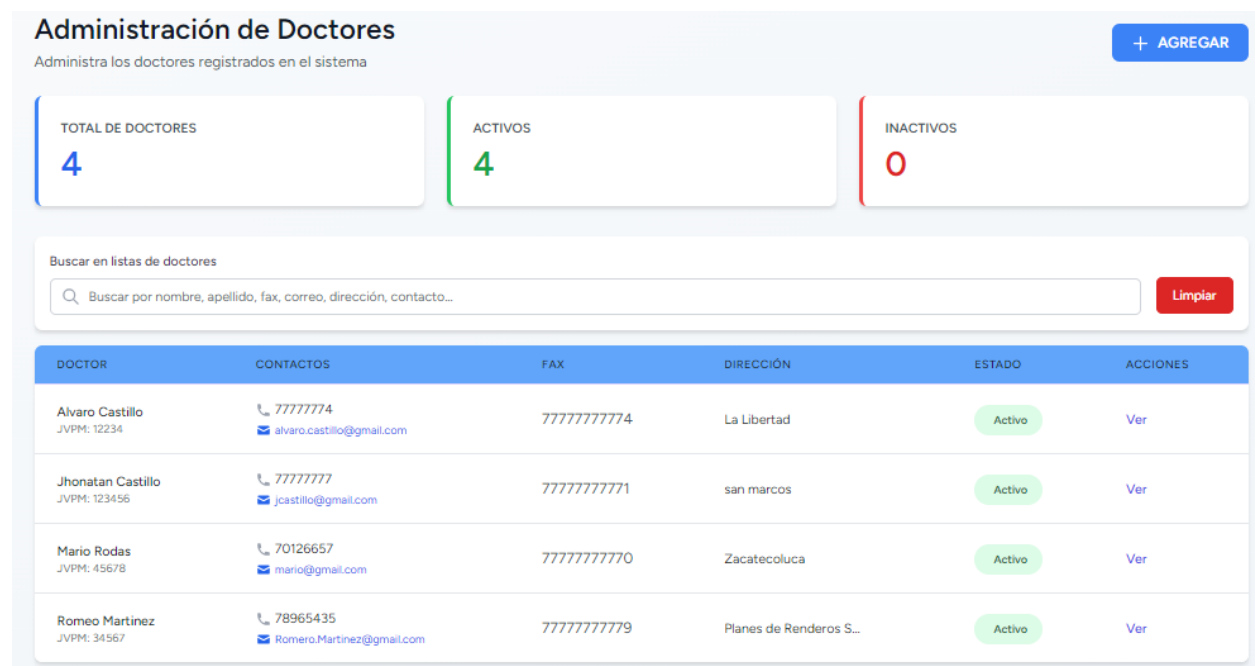

En la vista encontraras en la parte superior un pequeño resumen de los doctores creados en el módulo, por ejemplo, un total de doctores creados, cuantos doctores se encuentran activos y cuantos doctores se encuentran inactivos, recalcar que, si quieres editar, agregar o desactivar doctores deberás de solicitarlo a un usuario que posea rol administrador.


En la parte Inferior encontraras el detalle de cada Doctor creado su nombre, su numero de junta de vigilancia, su contacto, fax, dirección y su estado actual.

Ilustración 11 Información general de doctores.

Buscar en listas de doctores					
Buscar por nombre, apellido, fax, correo, dirección, contacto...					<button>Limpiar</button>
DOCTOR	CONTACTOS	FAX	DIRECCIÓN	ESTADO	ACCIONES
Alvaro Castillo JVPM: 12234	77777774 alvaro.castillo@gmail.com	7777777774	La Libertad	Activo	Ver
Jhonatan Castillo JVPM: 123456	7777777 jcastillo@gmail.com	7777777771	san marcos	Activo	Ver
Mario Rodas JVPM: 45678	70126657 mario@gmail.com	7777777770	Zacatecoluca	Activo	Ver
Romeo Martinez JVPM: 34567	78965435 Romero.Martinez@gmail.com	7777777779	Planes de Renderos S...	Activo	Ver

Modulo Gestión de Pacientes

Ilustración 12 Modulo gestión de pacientes.

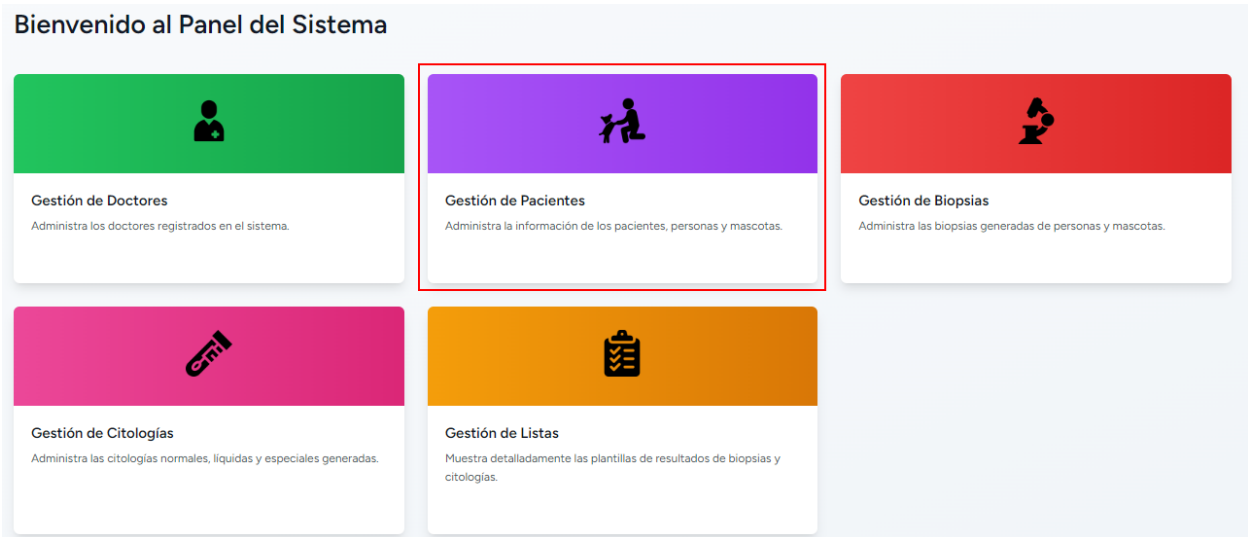

En este módulo encontrara los registros de pacientes creados por el administrador tanto de pacientes personas como de pacientes mascotas, para agregar un paciente nuevo persona o mascota la acción debe de realizarla un usuario con perfil administrador, sin embargo, con un perfil de empleado puedes editar la información de los pacientes ya sea de mascotas o de personas.

Módulo de Gestión de Pacientes Personas

En el módulo de pacientes personas encontraras en la parte superior un detalle general de los pacientes personas creados, un conteo de cuantos son pacientes son masculinos y cuantos pacientes son femeninos.

En la parte inferior encontraras a detalle todos los datos principales del paciente tales como: DUI, nombre y fecha de nacimiento, edad y sexo, contacto y dirección.

Ilustración 13 Modulo gestión de pacientes personas

Personas

Mascotas

Gestión de Personas

Administra los pacientes del sistema

TOTAL PACIENTES
2

MASCULINO
1

FEMENINO
1

Buscar en listas de pacientes

BuscarLimpiar

PACIENTE	DUI	EDAD/SEXO	CONTACTO	DIRECCIÓN	ESTADO	ACCIONES
Juan Perez Fecha de Nac: 16/01/1999	123456789	26 años Masculino	77777778 juan@gmail.com	Colonia San Jeronimo, ...	Activo	Ver
Veronica Ayala Fecha de Nac: 19/01/2004	123456791	21 años Femenino	77777771	Sin dirección	Activo	Ver

Ilustración 14 Filtro de búsqueda y detalle del paciente.

Personas

Mascotas

Gestión de Personas

Administra los pacientes del sistema

TOTAL PACIENTES
2

MASCULINO
1

FEMENINO
1

Buscar en listas de pacientes

BuscarLimpiar

PACIENTE	DUI	EDAD/SEXO	CONTACTO	DIRECCIÓN	ESTADO	ACCIONES
Juan Perez Fecha de Nac: 16/01/1999	123456789	26 años Masculino	77777778 juan@gmail.com	Colonia San Jeronimo, ...	Activo	Ver
Veronica Ayala Fecha de Nac: 19/01/2004	123456791	21 años Femenino	77777771	Sin dirección	Activo	Ver

Al dar clic en acción ver podrás observar cada uno de los campos con la información a detalle que posee el paciente persona.

Ilustración 15 Detalle del paciente.

Detalle del Paciente

Información Personal

NOMBRE Juan	APELLIDO Perez
DUI 123456789	CELULAR 77777778
SEXO Masculino	ESTADO Activo
FECHA DE NACIMIENTO 16/01/1999 26 años	ESTADO CIVIL casado
OCUPACIÓN empleado	CORREO ELECTRÓNICO juan@gmail.com
DIRECCIÓN Colonia San Jeronimo, Santo Domingo San Vicente	

Información del Sistema

FECHA DE CREACIÓN 16/11/2025 21:52	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 16/11/2025 21:52
--	---

Volver

Módulo de Gestión de Pacientes Mascotas

Ilustración 16 Modulo gestión de pacientes Mascotas

Personas Mascotas

Gestión de Mascotas

Administra las mascotas del sistema

+ AGREGAR

TOTAL MASCOTAS 2

CANINOS 1

OTROS 1

Mascota creada exitosamente.

Buscar en listas de mascotas

Buscar por nombre, apellido, DUI, correo, dirección, contacto...

Buscar Limpiar

MASCOTA	ESPECIE/RAZA	EDAD/SEXO	PROPIETARIO	CONTACTO	ESTADO	ACCIONES
Firulay	Perro bulldog	11 años Macho	carlos	77777772	Activo	Ver
Pelusa	gato Angora	3 años Hembra	Maria Jose Lopez	77777773 maria.jose@gmail.com	Activo	Ver

En el módulo de pacientes mascotas encontraras en la parte superior un total general de los pacientes mascotas creados, y un detalle de cuantos son mascotas caninas y cuantos son mascotas felinas.

En la parte inferior encontraras a detalle todos los datos principales del paciente mascota tales como: nombre de la mascota, la raza y especie, edad y sexo, nombre del propietario o dueño de la mascota, así como su contacto teléfono y correo electrónico.

Ilustración 17 Gestión de Mascotas.

Personas Mascotas

Gestión de Mascotas

Administra las mascotas del sistema

+ AGREGAR

TOTAL MASCOTAS 2

CANINOS 1

OTROS 1

Mascota creada exitosamente.

Buscar en listas de mascotas

Buscar por nombre, apellido, DUI, correo, dirección, contacto...

Buscar Limpiar

MASCOTA	ESPECIE/RAZA	EDAD/SEXO	PROPIETARIO	CONTACTO	ESTADO	ACCIONES
Firulay	Perro bulldog	11 años Macho	carlos	77777772	Activo	Ver
Pelusa	gato Angora	3 años Hembra	Maria Jose Lopez	77777773 maria.jose@gmail.com	Activo	Ver

Si das clic en la acción ver podrás ver a detalle todos los campos con la información del paciente.

Ilustración 18 Detalle mascota.

Detalle de la Mascota

Información Personal

NOMBRE Firulay	ESPECIE Perro
RAZA bulldog	ESTADO 1
SEXO Macho	PROPIETARIO carlos
CELULAR 77777772	CORREO ELECTRÓNICO No registrado

Información del Sistema

FECHA DE CREACIÓN 16/11/2025 21:59	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 16/11/2025 21:59
---	--


Volver

Módulo de Biopsias

En este módulo encontraras una vista general de todas las biopsias creadas, tanto biopsias de pacientes personas como biopsias de pacientes mascotas.

Podrás visualizar en la parte superior un total de biopsias creadas, un total de biopsias activas y un total de biopsias archivadas también una opción para poder descargar un reporte de biopsias en Excel según el filtro que hayas seleccionado.

Ilustración 19 Módulo de biopsias.

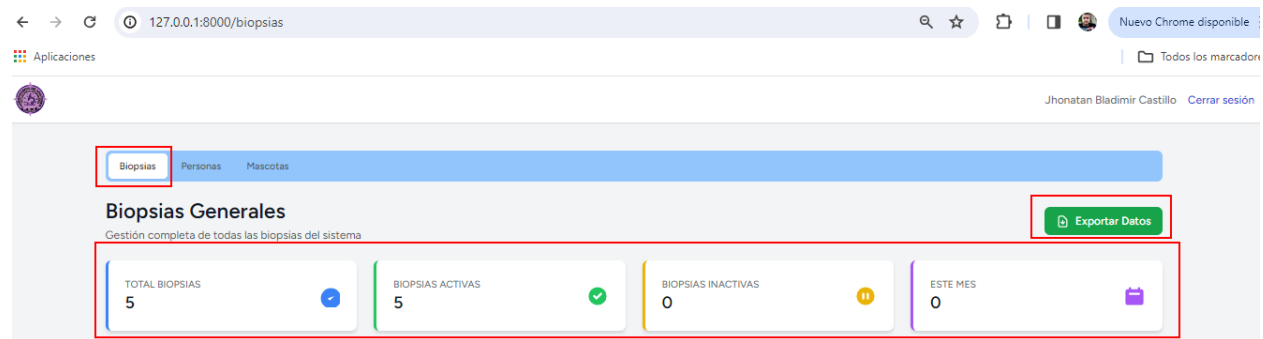

En la parte inferior encontraras una serie de filtros que te ayudaran a una búsqueda más personalizada y específica de la o las biopsias, entre los filtros que puedes utilizar tenemos

- Filtro por búsqueda por nombre ya sea por paciente mascotas o personas, así como también de doctores.
- Filtro por categorías: acá puedes filtrar todas las biopsias ya sea de personas o mascotas
- Filtro por tipo: acá puedes filtrar por el tipo de biopsia si es biopsia normal o si es biopsia líquida/lavado
- Filtro por estado: Puedes seleccionar todas las biopsias que están activas o inactivas
- Filtro por doctores: Puedes seleccionar un doctor en específico y te filtrara todas las biopsias solicitadas por dicho médico.
- Filtro por fecha: Podrás filtrar por fecha en que fue creada la biopsia.

Mas abajo encontraras la información general de las biopsias ya sea de forma global o según el filtro que hayas colocado en dicha información encontraras el numero o ID generado por la creación de biopsia, el tipo de biopsia, la fecha en que fue creada, la categoría si es mascota o de persona, el paciente, el doctor que solicito la biopsia, su diagnóstico y el estado de la biopsia que puede ser activa o archivada.

Ilustración 20 Filtro de búsqueda de biopsia.

Biopsias

Personas

Mascotas

Biopsias Generales

Gestión completa de todas las biopsias del sistema

EXPORTAR PDF

TOTAL BIOPSIAS

1

BIOPSIAS ACTIVAS

1

BIOPSIAS INACTIVAS

0

ESTE MES

1

Filtros y búsqueda

0 filtro(s) activo(s)

Buscar por paciente, mascota, doctor o diagnóstico...

Categoría

Todas las categorías

Tipo

Todos los tipos

Estado

Todos los estados

Doctor

Todos los doctores

Desde

dd/mm/aaaa

Hasta

dd/mm/aaaa

Filtrar

Limpiar

NÚMERO	TIPO BIOPSIA	FECHA	CATEGORÍA	PACIENTE/MASCOTA	DOCTOR	DIAGNÓSTICO	ESTADO	ACCIONES
BPNO001	Normal	16/11/2025	Personas	Juan Perez N/A años DUE: 123456789	Dr. Jhonatan Castillo 12345	cancer	Activa	Ver

En las acciones tienes la opción ver. En dicha acción al dar clic podrás ver de una forma más detallada de cada biopsia que selecciones ver.

Ilustración 21 Vista detalle de biopsia.

127.0.0.1:8000/biopsias/mascotas/BMN0001

Información Básica

Número de Biopsia

BMN0001

Fecha Recibida

31/10/2025

Estado

Activo

Fecha de Registro

31/10/2025

Información de la Mascota

Nombre

Pelusa

Especie

Gato

Raza

Angora

Sexo

hembra

Edad

5 años

Dueño

Maria Jose Lopez

Teléfono

77777773

Correo

maria.jose@gmail.com

Información del Doctor

Nombre del Doctor

Dr. Jhonatan Castillo

Correo

jcastillo@gmail.com

Celular

77777777

Módulo de Biopsias Persona

Ilustración 22 Biopsia personas.

NUMERO	TIPO	FECHA	PACIENTE	DOCTOR	DIAGNÓSTICO	ESTADO	ACCIONES
BPL0001	Líquida	31/10/2025	Juan Ramon Perez Gonzalez 34 años DUI: 12345678	Dr. Mario Rodas 45678	Envio de muestra para...	Activa	Ver
BPNO001	Normal	31/10/2025	Juan Iopez 48 años DUI: 12345678	Dr. Jhonatan Castillo 123456	Se observa pequeña p...	Activa	Ver
BPNO002	Normal	31/10/2025	Juan Ramon Perez Gonzalez 34 años DUI: 12345678	Dr. Alvaro Castillo 12234	Reservado	Activa	Ver

En este módulo encontraras únicamente las biopsias creadas para pacientes personas como en módulos anteriores podrás visualizar un detalle del total de biopsias creadas, un total de biopsias activas y un total de biopsias inactivas, así como un total de biopsias creadas en el mes, también cuentas con una opción botón de extracción de reporte en formato Excel.

Ilustración 23 Vista detalle de biopsia personas.

NUMERO	TIPO	FECHA	PACIENTE	DOCTOR	DIAGNÓSTICO	ESTADO	ACCIONES
BPL0001	Líquida	31/10/2025	Juan Ramon Perez Gonzalez 34 años DUI: 12345678	Dr. Mario Rodas 45678	Envio de muestra para...	Activa	Ver
BPNO001	Normal	31/10/2025	Juan Iopez 48 años DUI: 12345678	Dr. Jhonatan Castillo 123456	Se observa pequeña p...	Activa	Ver
BPNO002	Normal	31/10/2025	Juan Ramon Perez Gonzalez 34 años DUI: 12345678	Dr. Alvaro Castillo 12234	Reservado	Activa	Ver

En la parte inferior encontraras los filtros para una búsqueda mas personalizada entre los filtros tenemos:

- Búsqueda por doctor, paciente y diagnóstico de forma editable
- Filtro por tipo: acá puedes filtrar las biopsias por normal o liquidas
- Filtro por estado: filtra las biopsias por activas e inactivas
- Filtro por doctores: puedes seleccionar el doctor solicitante de biopsias

También podrás visualizar las biopsias ya sean normales o liquidas con los siguientes campos: código o id de la biopsia, el tipo de biopsia si es normal o liquida, la fecha en que fue creada la biopsia el nombre del paciente, el diagnóstico y el estado de la biopsia.

Ilustración 24 Filtro de biopsia personas

Filtros y búsqueda

0 filtro(s) activo(s)

Buscar por paciente, doctor o diagnóstico...

Tipo

Todos los tipos

Estado

Todos los estados

Doctor

Todos los doctores

Desde

dd/mm/aaaa

Hasta

dd/mm/aaaa

Filtrar

Limpiar

NÚMERO	TIPO	FECHA	PACIENTE	DOCTOR	DIAGNÓSTICO	ESTADO	ACCIONES
BPL0001	Líquida	31/10/2025	Juan Ramon Perez Gonzalez 34 años DUI: 12345676	Dr. Mario Rodas 45678	Envio de muestra para...	Activa	Ver
BPNO001	Normal	31/10/2025	juan lopez 48 años DUI: 12345678	Dr. Jhonatan Castillo 123456	Se observa pequeña p...	Activa	Ver
BPNO002	Normal	31/10/2025	Juan Ramon Perez Gonzalez 34 años DUI: 12345676	Dr. Alvaro Castillo 12234	Reservado	Activa	Ver

En las acciones tienes una opción “ver” la cual te permitirá obtener una vista detalla del contenido de la biopsia.

Ilustración 25 Vista general de biopsias de personas.

NÚMERO	TIPO	FECHA	PACIENTE	DOCTOR	DIAGNÓSTICO	ESTADO	ACCIONES
BPL0001	Líquida	31/10/2025	Juan Ramon Perez Gonzalez 34 años DUI: 12345676	Dr. Mario Rodas 45678	Envio de muestra para analisis	Activa	Ver
BPNO001	Normal	31/10/2025	juan lopez 48 años DUI: 12345678	Dr. Jhonatan Castillo 123456	Se observa pequeña protuberancia en brazo dere...	Activa	Ver
BPNO002	Normal	31/10/2025	Juan Ramon Perez Gonzalez 34 años DUI: 12345676	Dr. Alvaro Castillo 12234	Reservado	Activa	Ver
BPNO003	Normal	31/10/2025	juan lopez 48 años DUI: 12345678	Dr. Romeo Martinez 34567	Analisis de biopsia	Activa	Ver

Ilustración 26 Detalle de biopsia persona.

Detalle de Biopsia Persona

Información Básica

Número de Biopsia
BPL0001

Fecha Recibida
31/10/2025

Estado
Activo

Fecha de Registro
31/10/2025

Información del Paciente

Nombre Completo
Juan Ramon Perez
Gonzalez

DUI
12345676

Edad
34 años

Sexo
Masculino

Correo
ramon@gmail.com

Teléfono
7777-7778


Volver

Imprimir

Para cada biopsia encontraras opciones para poder imprimir la biopsia seleccionada, lo único que no podrás hacer es editar la biopsia debido a que ese acceso es únicamente permitido por el usuario administrador.


Creación de Biopsia Normal Persona

Ilustración 27 Creación de biopsia normal persona.

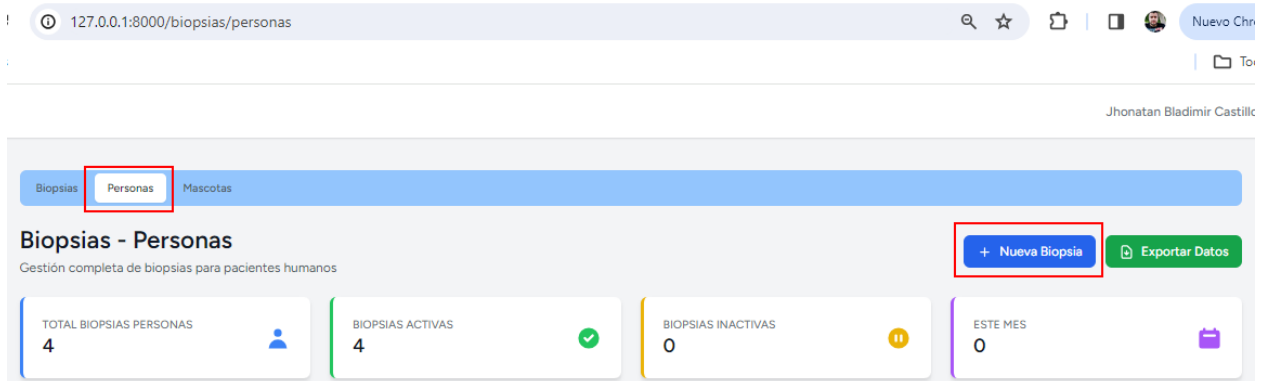

Para crear una biopsia das clic en nueva biopsia, la cual al dar clic tendrás dos opciones para seleccionar una biopsia normal o una biopsia lavado.

Ilustración 28 Selección de biopsia normal o liquida.

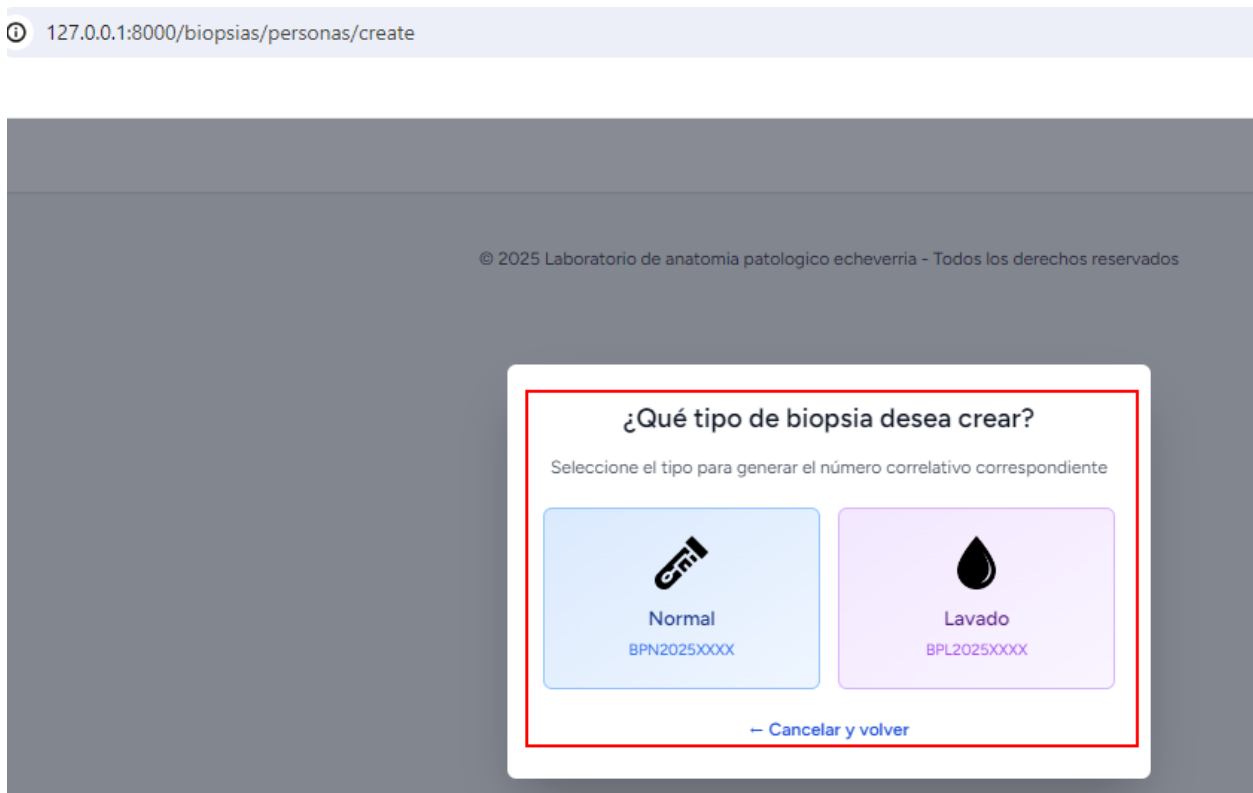

Al seleccionar biopsia normal aparecerá el formulario que podrás llenar con los datos de biopsia

A continuación, te explico los campos a llenar del formulario.

- El número de biopsia se creará de forma automática en donde B=biopsia P =persona N= normal seguido del correlativo correspondiente.
- Fecha de recepción será la fecha de creación de la biopsia
- Paciente: acá deberás seleccionar al paciente, el cual tiene que ser creado con antelación en el módulo de gestión de pacientes el cual fue explicado anteriormente.
- Doctor: Debes de seleccionar al doctor correspondiente el cual también deben de ser creado antelación en el módulo de gestión de doctores.
- Diagnóstico clínico: este campo es editable el cual se llenará conforme a la solicitud recibida.

Ilustración 29 Nueva biopsia persona.

127.0.0.1:8000/biopsias/personas/create

Nueva Biopsia - Persona

Datos Básicos

Número de Biopsia: BPN0004

Fecha de Recepción *: 05/11/2025

Paciente *: Seleccionar...


Doctor *: Seleccionar...

Diagnóstico Clínico *: Describe el diagnóstico clínico...

Usar Plantilla (Opcional)

En la parte inferior tendrás dos opciones. Llenar los campos de forma manual sin el uso de plantillas y la otra será la selección de la platilla creada con anticipación en el módulo de Gestión de Listas la cual se explicará posteriormente. Si seleccionas Usar la plantilla despliegas la opción y buscas el código de la plantilla o su nombre y das buscar

Ilustración 30 Búsqueda de plantilla.

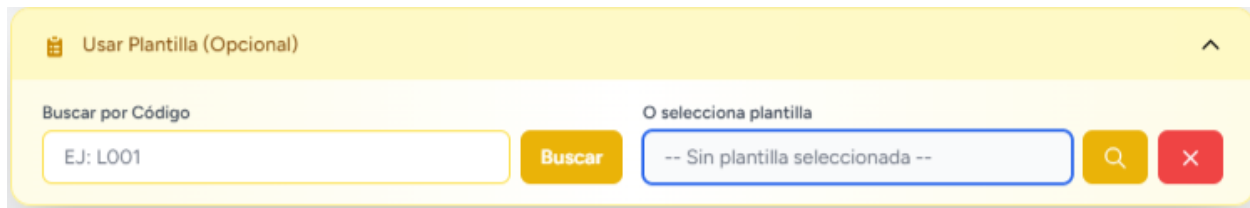

Usar Plantilla (Opcional)

Buscar por Código

EJ: L001


Buscar

O selecciona plantilla

-- Sin plantilla seleccionada --

Esto lo que hará es ir a traer tu plantilla y llenarte el campo macroscópico, con la información que colocaste en tu plantilla, este campo también será editable para que puedas corregir, aumentar o disminuir la información.

Ilustración 31 Selección de plantilla.

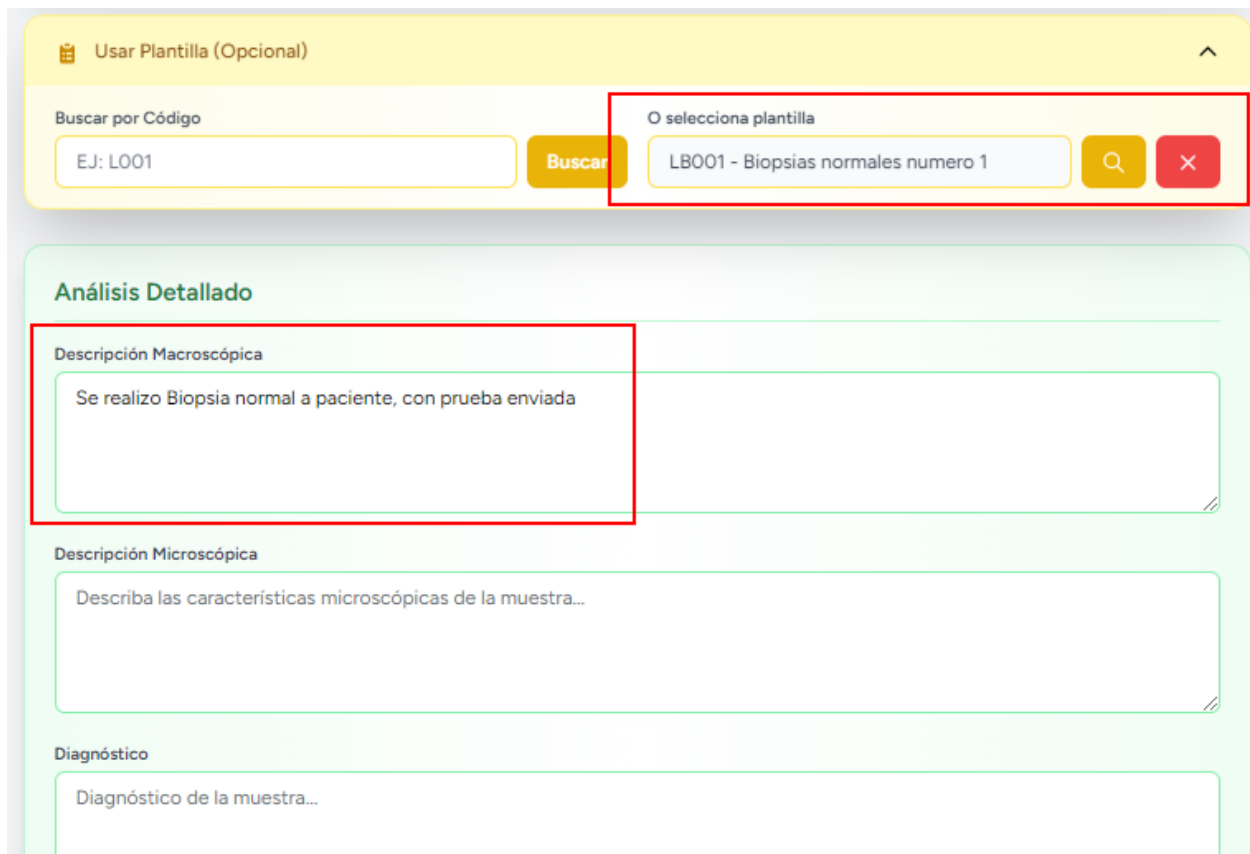

Usar Plantilla (Opcional)

Buscar por Código

EJ: L001

Buscar

O selecciona plantilla

LB001 - Biopsias normales numero 1

Análisis Detallado

Descripción Macroscópica

Se realizo Biopsia normal a paciente, con prueba enviada

Descripción Microscópica

Describe las características microscópicas de la muestra...

Diagnóstico

Diagnóstico de la muestra...

Cuando hayas finalizado de editar tu biopsia ya puedes generarla con las opciones de la parte final del formulario con el botón Guardar Biopsia.


Ilustración 32 Selección de acción guardar biopsia.



Cancelar Limpiar Guardar Biopsia

Creación de Biopsia Lavado Persona

Ilustración 33 Selección de biopsia lavado persona.

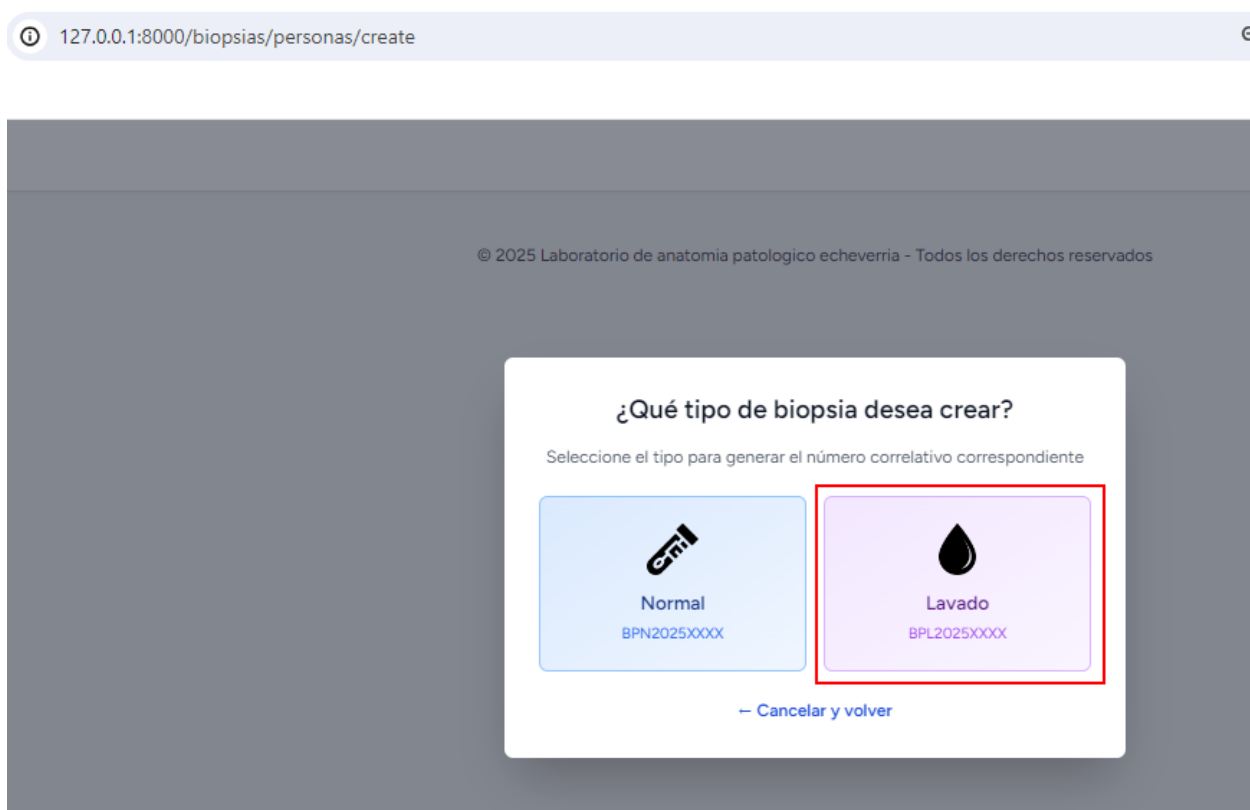

127.0.0.1:8000/biopsias/personas/create

© 2025 Laboratorio de anatomia patologico echeverria - Todos los derechos reservados

¿Qué tipo de biopsia desea crear?

Seleccione el tipo para generar el número correlativo correspondiente

Normal
BPN2025XXXX

Lavado
BPL2025XXXX

— Cancelar y volver

Al dar clic en la opción de Biopsia Lavado aparecerá un formulario que deberás de llenar tal cual lo vimos con la opción de biopsias normales te explico los campos:

- El número de biopsia se creará de forma automática en donde B=biopsia P =persona L= Liquida seguido del correlativo correspondiente.
- Fecha de recepción será la fecha de creación de la biopsia
- Paciente: acá deberás seleccionar al paciente, el cual tiene que ser creado con antelación en el módulo de gestión de pacientes el cual fue explicado anteriormente.

- Doctor: Debes de seleccionar al doctor correspondiente el cual también deben de ser creado antelación en el módulo de gestión de doctores.
- Diagnóstico clínico: este campo es editable el cual se llenará conforme a la solicitud recibida.

Ilustración 34 Nueva biopsia persona

127.0.0.1:8000/biopsias/personas/create

Jhor

Nueva Biopsia - Persona

Datos Básicos

Número de Biopsia: BPL0002

Fecha de Recepción *: 05/11/2025

Paciente *: Seleccionar...

Doctor *: Seleccionar...

Diagnóstico Clínico *: Describe el diagnóstico clínico...

Usar Plantilla (Opcional)

En la parte inferior tendrás dos opciones. Llenar los campos de forma manual sin el uso de plantillas y la otra será la selección de la platilla creada con anticipación en el módulo de Gestión de Listas la cual se explicará posteriormente. Si seleccionas Usar la plantilla despliegas la opción y buscas el código de la plantilla o su nombre y das buscar

Ilustración 35 Búsqueda de plantilla.

The image shows a web-based form for a detailed analysis. At the top, there is a yellow header bar with a button labeled 'Usar Plantilla (Opcional)' and a dropdown arrow. Below this is a green-bordered section titled 'Análisis Detallado'. Inside this section, there are three text input fields, each with a red border. The first field is labeled 'Descripción Macroscópica' and contains the placeholder text 'Describe las características macroscópicas de la muestra...'. The second field is labeled 'Descripción Microscópica' and contains the placeholder text 'Describe las características microscópicas de la muestra...'. The third field is labeled 'Diagnóstico' and contains the placeholder text 'Diagnóstico de la muestra...'. At the bottom of the form, there are three buttons: 'Cancelar' (dark blue), 'Limpiar' (orange), and 'Guardar Biopsia' (blue).

Esto lo que hará es ir a traer tu plantilla y llenarte el campo macroscópico, con la información que colocaste en tu plantilla, este campo también será editable para que puedas corregir, aumentar o disminuir la información.

Ilustración 36 Selección de plantilla.

Usar Plantilla (Opcional)

Buscar por Código

EJ: L001

Buscar

O selecciona plantilla

LB001 - Biopsias normales numero 1

Análisis Detallado

Descripción Macroscópica

Se realizo Biopsia normal a paciente, con prueba enviada

Descripción Microscópica

Describe las características microscópicas de la muestra...

Diagnóstico

Diagnóstico de la muestra...

Cuando hayas finalizado de editar tu biopsia ya puedes generarla con las opciones de la parte final del formulario con el botón Guardar Biopsia.

Ilustración 37 Selección de acción guardar biopsia.

Cancelar

Limpiar

Guardar Biopsia

Módulo de Biopsias Mascotas

Ilustración 38 Módulo de biopsias mascotas.

Biopsias - Mascotas

Gestión completa de biopsias para mascotas

+ Nueva Biopsia EXPORTAR PDF

TOTAL BIOPSIAS MASCOTAS 1

BIOPSIAS ACTIVAS 1

BIOPSIAS INACTIVAS 0

ESTE MES 0

Filtros y búsqueda 0 filtro(s) activo(s)

NÚMERO	TIPO	FECHA	MASCOTA	DOCTOR	DIAGNÓSTICO	ESTADO	ACCIONES
BMN0001	Normal	31/10/2025	Pelusa Gato - Angora Dueño: Maria Jose Lopez	Dr. Jhonatan Castillo 123456	pruebas	Activa	Ver

En este módulo encontraras únicamente las biopsias creadas para pacientes mascotas como en módulos anteriores podrás visualizar un detalle del total de biopsias creadas, un total de biopsias activas y un total de biopsias inactivas, así como un total de biopsias creadas en el mes, también cuentas con una opción botón de extracción de reporte en formato Excel.

Ilustración 39 Detalle de cantidad de biopsias.

Biopsias - Mascotas

Gestión completa de biopsias para mascotas

+ Nueva Biopsia Exportar Datos

TOTAL BIOPSIAS MASCOTAS 1

BIOPSIAS ACTIVAS 1

BIOPSIAS INACTIVAS 0

ESTE MES 0

En la parte inferior encontraras los filtros para una búsqueda más personalizada entre los filtros tenemos:

- Búsqueda por doctor, paciente y diagnóstico de forma editable
- Filtro por tipo: acá puedes filtrar las biopsias por normal o liquidas
- Filtro por estado: filtra las biopsias por activas e inactivas
- Filtro por doctores: puedes seleccionar el doctor solicitante de biopsias

También podrás visualizar de forma general las biopsias ya sean normales o liquidas con los siguientes campos: código o id de la biopsia, el tipo de biopsia si es normal o liquida, la fecha en que fue creada la biopsia el nombre de la mascota, el doctor, el diagnóstico y el estado.

Ilustración 40 Filtro de biopsias.

Filtros y búsqueda

0 filtro(s) activo(s)

Buscar por mascota, dueño, doctor o diagnóstico...

Tipo

Todos los tipos

Estado

Todos los estados

Doctor

Todos los doctores

Desde

dd/mm/aaaa

Hasta

dd/mm/aaaa

Filtrar

Limpiar

En las acciones tienes una opción “ver” la cual te permitirá obtener una vista detalla del contenido de la biopsia.

Ilustración 41 Acción ver biopsia.

NÚMERO	TIPO	FECHA	MASCOTA	DOCTOR	DIAGNÓSTICO	ESTADO	ACCIONES
BMN0001	Normal	31/10/2025	Pelusa Gato - Angora Dueño: N/A	Dr. Jhonatan Castillo 123456	pruebas	Activa	Ver

Ilustración 42 Detalle de la biopsia.

Detalle de Biopsia Mascota

Información Básica

Número de Biopsia BMN0001	Fecha Recibida 31/10/2025	Estado Activo	Fecha de Registro 31/10/2025
------------------------------	------------------------------	------------------	---------------------------------

Información de la Mascota

Nombre Pelusa	Especie Gato	Raza Angora	Sexo hembra
Edad 5 años	Dueño Maria Jose Lopez	Teléfono 77777773	Correo maria.jose@gmail.com

Información del Doctor

Volver Imprimir

Para cada biopsia encontraras opciones para poder imprimir la biopsia seleccionada si deseas guardarla en PDF también lo puedes hacer desde la opción imprimir opción guardar.

Creación de Biopsia Normal Mascota

Ilustración 43 Creación de biopsia normal de mascota.

Biopsias Personas Mascotas

Biopsias - Mascotas
Gestión completa de biopsias para mascotas

+ Nueva Biopsia Exportar Datos

TOTAL BIOPSIAS MASCOTAS 1	BIOPSIAS ACTIVAS 1	BIOPSIAS INACTIVAS 0	ESTE MES 0
------------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------

Para crear una biopsia das clic en nueva biopsia, la cual al dar clic tendrás dos opciones para seleccionar una biopsia normal o una biopsia lavado.

Ilustración 44 Selección de tipo de biopsia normal.

127.0.0.1:8000/biopsias/mascotas/create

© 2025 Laboratorio de anatomia patologico echeverria - Todos los derechos reservados

¿Qué tipo de biopsia desea crear?

Seleccione el tipo para generar el número correlativo correspondiente

 Normal BMN0001	 Lavado BML0001
--	--

— Cancelar y volver

Al seleccionar biopsia normal aparecerá el formulario que podrás llenar con los datos de biopsia

A continuación, te explico los campos a llenar del formulario.

- El número de biopsia se creará de forma automática en donde B=biopsia M=mascota N= normal seguido del correlativo correspondiente.
- Fecha de recepción será la fecha de creación de la biopsia
- Paciente: acá deberás seleccionar al paciente mascota, el cual tiene que ser creado con antelación en el módulo de gestión de pacientes opción mascota el cual fue explicado anteriormente.
- Doctor: Debes de seleccionar al doctor correspondiente el cual también deben de ser creado antelación en el módulo de gestión de doctores.
- Diagnóstico clínico: este campo es editable el cual se llenará conforme a la solicitud recibida.

Ilustración 45 Nueva biopsia normal mascota.

Nueva Biopsia - Mascota [X]

Datos Básicos

Número de Biopsia: **BMN0002**

Fecha de Recepción *: 05/11/2025

Mascota *: Seleccionar...

Doctor *: Seleccionar...

Diagnóstico Clínico *: Describa el diagnóstico clínico...

Usar Plantilla (Opcional) [v]

En la parte inferior tendrás dos opciones. Llenar los campos de forma manual sin el uso de plantillas y la otra será la selección de la platilla creada con anticipación en el módulo de Gestión de Listas la cual se explicará posteriormente. Si seleccionas Usar la plantilla despliegas la opción y buscas el código de la plantilla o su nombre y das buscar

Ilustración 46 Búsqueda de plantilla.

The image shows a web-based form for a detailed analysis. At the top, there is a yellow header bar with a red border around the left portion containing a document icon and the text 'Usar Plantilla (Opcional)'. Below this is a green section titled 'Análisis Detallado'. Inside this section, there are three text input fields, each with a red border. The first field is labeled 'Descripción Macroscópica' and contains the placeholder text 'Describe las características macroscópicas de la muestra...'. The second field is labeled 'Descripción Microscópica' and contains the placeholder text 'Describe las características microscópicas de la muestra...'. The third field is labeled 'Diagnóstico' and contains the placeholder text 'Diagnóstico de la muestra...'. At the bottom of the form, there are three buttons: 'Cancelar' (dark grey), 'Limpiar' (orange), and 'Guardar Biopsia' (blue).

Esto lo que hará es ir a traer tu plantilla y llenarte el campo macroscópico, con la información que colocaste en tu plantilla, este campo también será editable para que puedas corregir, aumentar o disminuir la información.

Ilustración 47 Selección de plantilla.

Usar Plantilla (Opcional)

Buscar por Código

EJ: L001

Buscar

O selecciona plantilla

LB001 - Biopsias normales numero 1

Análisis Detallado

Descripción Macroscópica

Se realizo Biopsia normal a paciente, con prueba enviada

Descripción Microscópica

Describe las características microscópicas de la muestra...

Diagnóstico

Diagnóstico de la muestra...

Cuando hayas finalizado de editar tu biopsia ya puedes generarla con las opciones de la parte final del formulario con el botón Guardar Biopsia.

Ilustración 48 Selección acción guardar biopsia.

Cancelar

Limpiar

Guardar Biopsia

Creación de Biopsia Lavado Mascota

Ilustración 49 Selección de biopsia lavado mascota.

127.0.0.1:8000/biopsias/mascotas/create 🔍

© 2025 Laboratorio de anatomia patologico echeverria - Todos los derechos reservados

¿Qué tipo de biopsia desea crear?

Seleccione el tipo para generar el número correlativo correspondiente



Normal
BMN0001



Lavado
BML0001

[— Cancelar y volver](#)

Al dar clic en la opción de Biopsia Lavado aparecerá un formulario que deberás de llenar tal cual lo vimos con la opción de biopsias normales te explico los campos:

- El número de biopsia se creará de forma automática en donde B=biopsia M =mascota L= Liquida seguido del correlativo correspondiente.
- Fecha de recepción será la fecha de creación de la biopsia
- Paciente: acá deberás seleccionar al paciente, el cual tiene que ser creado con antelación en el módulo de gestión de pacientes el cual fue explicado anteriormente.
- Doctor: Debes de seleccionar al doctor correspondiente el cual también deben de ser creado antelación en el módulo de gestión de doctores.
- Diagnóstico clínico: este campo es editable el cual se llenará conforme a la solicitud recibida.

Ilustración 50 Nueva biopsia mascota.

127.0.0.1:8000/biopsias/mascotas/create 🔍 ☆ ☰

Nueva Biopsia - Mascota

Datos Básicos

Número de Biopsia

BML0001

Fecha de Recepción *

05/11/2025

Mascota *

Seleccionar...

Doctor *

Seleccionar...

Diagnóstico Clínico *

Describe el diagnóstico clínico...

Usar Plantilla (Opcional)

Análisis Detallado (Opcional)

Cancelar

Guardar Biopsia

En la parte inferior tendrás dos opciones. Llenar los campos de forma manual sin el uso de plantillas y la otra será la selección de la plantilla creada con anticipación en el módulo de Gestión de Listas la cual se explicará posteriormente. Si seleccionas Usar la plantilla despliegas la opción y buscas el código de la plantilla o su nombre y das buscar

Ilustración 51 Búsqueda de plantilla.

The image shows a web-based form for a detailed analysis. At the top, there is a yellow header bar with a red border around the left portion containing a document icon and the text 'Usar Plantilla (Opcional)'. Below this is a green section titled 'Análisis Detallado'. Inside this section, there are three text input fields, each with a red border. The first field is labeled 'Descripción Macroscópica' and contains the placeholder text 'Describe las características macroscópicas de la muestra...'. The second field is labeled 'Descripción Microscópica' and contains the placeholder text 'Describe las características microscópicas de la muestra...'. The third field is labeled 'Diagnóstico' and contains the placeholder text 'Diagnóstico de la muestra...'. At the bottom of the form, there are three buttons: 'Cancelar' (dark grey), 'Limpiar' (orange), and 'Guardar Biopsia' (blue).

Esto lo que hará es ir a traer tu plantilla y llenarte el campo macroscópico, con la información que colocaste en tu plantilla, este campo también será editable para que puedas corregir, aumentar o disminuir la información.

Ilustración 52 Selección de plantilla.

Usar Plantilla (Opcional)

Buscar por Código

EJ: L001

Buscar

O selecciona plantilla

LB001 - Biopsias normales numero 1

Análisis Detallado

Descripción Macroscópica

Se realizo Biopsia normal a paciente, con prueba enviada

Descripción Microscópica

Describe las características microscópicas de la muestra...

Diagnóstico

Diagnóstico de la muestra...

Cuando hayas finalizado de editar tu biopsia ya puedes generarla con las opciones de la parte final del formulario con el botón Guardar Biopsia.

Ilustración 53 Selección de acción guardar biopsia.


Cancelar

Limpiar

Guardar Biopsia

Módulo de citologías


Ilustración 54 Módulo de citologías.

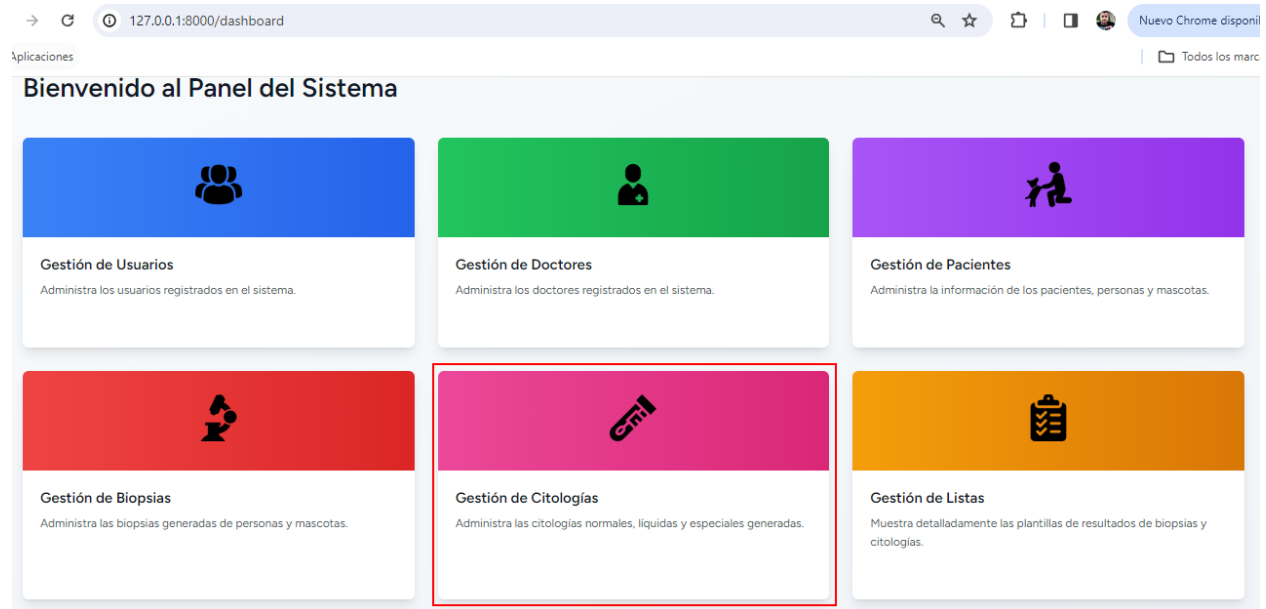

En este módulo encontraras una vista general de todas las Citologías creadas.

Podrás visualizar en la parte superior un total de citologías creadas, un total de citologías activas y un total de citologías inactivas o archivadas y un total de citologías creadas en el mes.

Ilustración 55 Detalle de cantidad de biopsias.

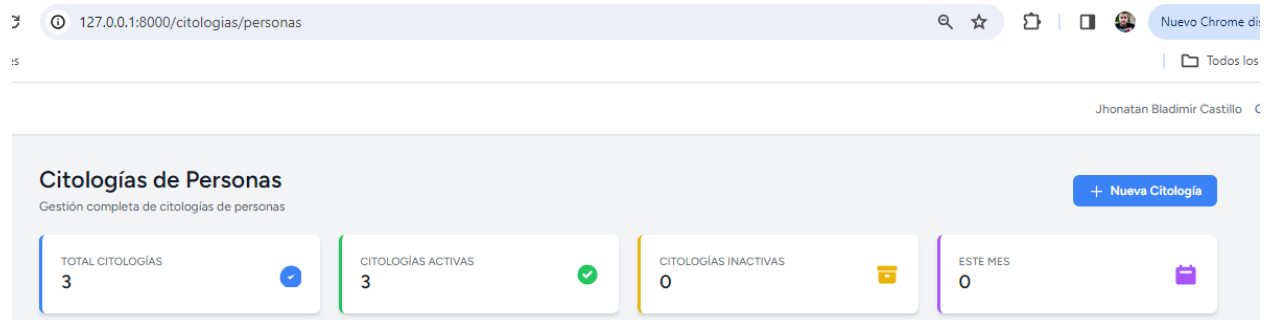

En la parte inferior encontraras una serie de filtros que te ayudaran a una búsqueda más personalizada y específica de la o las citologías, entre los filtros que puedes utilizar tenemos

- Filtro por búsqueda por nombre ya sea por paciente, así como también de doctores.
- Filtro por estado: Puedes seleccionar todas las biopsias que están activas o inactivas
- Filtro por doctores: Puedes seleccionar un doctor en específico y te filtrara todas las biopsias solicitadas por dicho médico.

Mas abajo encontraras la información general de las citologías ya sea de forma global o según el filtro que hayas colocado, en dicha información encontraras el numero o ID generado por la creación de la citología, el tipo de citología, el paciente, el remitente, la fecha en que fue creada la citología y su estado.

Ilustración 56 Filtros y detalle de citologías.

Buscar por Paciente o Doctor		Todos los estados		Todos los doctores		Filtrar Limpiar
N° CITOLOGÍA	TIPO	PACIENTE	REMITENTE	FECHA	ESTADO	ACCIONES
CE202500001	Especial	juan lopez DUI: N/A	Clinica sagrado corazon	31/10/2025	Activa	Ver Imprimir
CN202500001	Normal	juan lopez DUI: N/A	Dr. Mario Rodas	31/10/2025	Activa	Ver Imprimir
CN202500002	Normal	juan lopez DUI: N/A	Dr. Alvaro Castillo	31/10/2025	Activa	Ver Imprimir

En las acciones tienes la opción ver e imprimir. En dicha acción al dar clic podrás ver de una forma más detallada de cada biopsia que selecciones ver.

Ilustración 57 Vista general de citologías personas.

Citologías de Personas

Gestión completa de citologías de personas

+ Nueva Citología

TOTAL CITOLOGÍAS

3

CITOLOGÍAS ACTIVAS

3

CITOLOGÍAS INACTIVAS

0

ESTE MES

0

Buscar por Paciente o Doctor

Todos los estados

Todos los doctores

Filtrar

Limpiar

N° CITOLOGÍA	TIPO	PACIENTE	REMITENTE	FECHA	ESTADO	ACCIONES
CE202500001	Especial	juan lopez DUI: N/A	Clinica sagrado corazon	31/10/2025	Activa	Ver Imprimir
CN202500001	Normal	juan lopez DUI: N/A	Dr. Mario Rodas	31/10/2025	Activa	Ver Imprimir
CN202500002	Normal	juan lopez DUI: N/A	Dr. Alvaro Castillo	31/10/2025	Activa	Ver Imprimir

Ilustración 58 Detalle de citología.

Detalles de Citología

Número: **CE202500001**

[Editar](#)[Imprimir](#)[Volver](#)

Información Básica

Número de Citología CE202500001	Tipo de Citología Especial	Fecha Recibida 31/10/2025	Estado ✓ Activa
---	--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Información del Paciente

Nombre Completo juan lopez	DUI	Edad 48 años	Sexo Masculino
--------------------------------------	-----	------------------------	--------------------------


Remitente Responsable

Nombre del Remitente Clinica sagrado corazon	Celular 56787654
--	----------------------------

Dentro de la citología tendrás opciones donde podrás editar la citología y podrá imprimir los resultados.


Creación de Citología

Ilustración 59 Creación de citología.

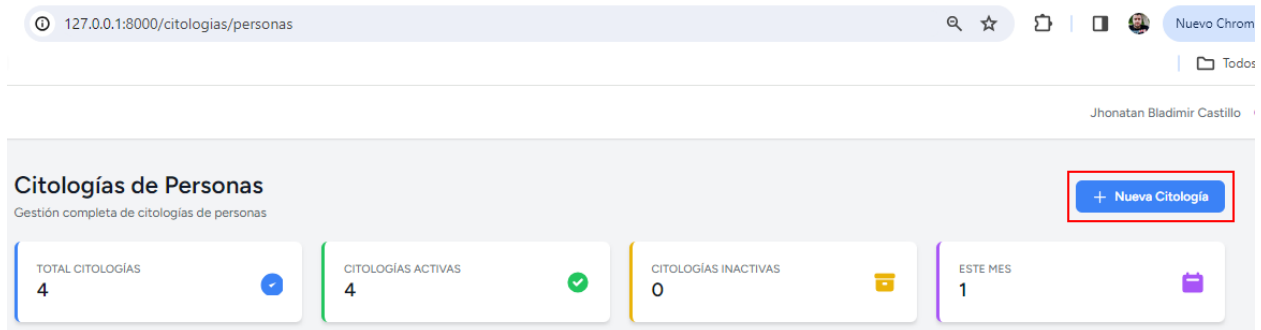

Para crear una citología debes de dar clic en la opción nueva citología en la cual te aparecerán 3 opciones que debes de seleccionar según corresponda las cuales son citologías normales, líquidas y especiales

Ilustración 60 Selección de citología normal, líquida, especial.

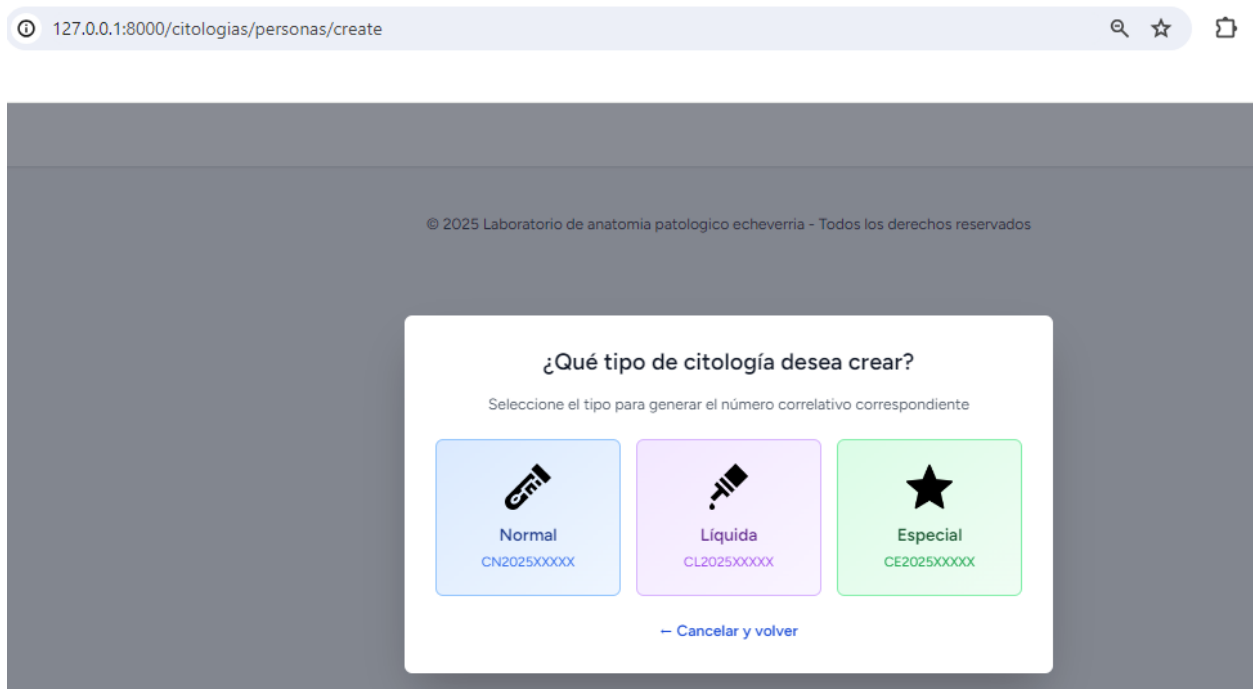

Citologías Normales

Ilustración 61 Citología normal.

¿Qué tipo de citología desea crear?

Seleccione el tipo para generar el número correlativo correspondiente

Normal
CN2025XXXX

Líquida
CL2025XXXX

Especial
CE2025XXXX

[- Cancelar y volver](#)

Damos clic en citologías normales y automáticamente desplegara un formulario el cual deberás de llenar según corresponda, te explico los campos:

- Se te generará un código o id de citología dicho id estará relacionado al tipo de citología que hayas seleccionado por ejemplo CN= citología normal 2025= año de la creación y el correlativo de la citología.
- Fecha de recepción será la fecha en que ingresaste la citología
- Paciente: deberás de seleccionarlo por lo tanto el paciente deberá de existir en el módulo de gestión de pacientes personas explicado con anterioridad.
- Doctor: deberás de seleccionar el doctor por lo tanto deberá de existir o crearse con anticipación en el modulo de gestión de doctores

Ilustración 62 Nueva citología persona.

En la parte Inferior tendrás dos opciones una es llenar de forma manual los campos de descripción y de diagnóstico, o la otra es de selección de la plantilla la cual también debe de estar creada anticipadamente en el módulo de gestión de listas opción citologías.

Si seleccionas plantilla deberás de buscar y seleccionar la plantilla acorde a tus necesidades. La plantilla lo que hará es llenar los campos de descripción y diagnóstico de forma automática, pero los campos son editables para que puedas seguir editando la citología o quitar palabras que no corresponden a tus necesidades.

Ilustración 63 Búsqueda y selección de plantilla.

Usar Plantilla (Opcional)

Buscar por Código

LC001

Buscar

O selecciona plantilla

LC001 - posiblemente cancer es necesario realizar mas pruebas

Descripción de la Muestra

Descripción *

Se envia tejido de protuberancia en brazo derecho del paciente

Diagnóstico *

posiblemente cancer es necesario realizar mas pruebas

Cancelar Guardar Citología

Al finalizar la citología deberás de dar clic en el botón guardar citología la cual se guardará automáticamente.

Ilustración 64 Selección de acción guardar citología.

Cancelar Guardar Citología

Citologías Líquidas

Ilustración 65 Citología líquidas.

¿Qué tipo de citología desea crear?

Seleccione el tipo para generar el número correlativo correspondiente



Normal
CN2025XXXXX



Líquida
CL2025XXXXX



Especial
CE2025XXXXX

[— Cancelar y volver](#)

Damos clic en citologías líquidas y automáticamente desplegará un formulario el cual deberás de llenar según corresponda, te explico los campos:

- Se te generará un código o id de citología dicho id estará relacionado al tipo de citología que hayas seleccionado por ejemplo CL= citología líquida 2025= año de la creación y el correlativo de la citología.
- Tipo de citología: describirá el tipo de citología seleccionada.
- Fecha de recepción será la fecha en que ingresaste la citología
- Paciente: deberás de seleccionarlo por lo tanto el paciente deberá de existir en el módulo de gestión de pacientes personas explicado con anterioridad.
- Doctor: deberás de seleccionar el doctor por lo tanto deberá de existir o crearse con anticipación en el módulo de gestión de doctores

Ilustración 66 Nueva citología persona.

Nueva Citología - Persona X

Número: CL202500002

Datos Básicos

Tipo de Citología Fecha de Recepción *

Citología Líquida 05/11/2025

Cambiar tipo

Paciente * Doctor *

Seleccionar... Seleccionar...

En la parte Inferior tendrás dos opciones una es llenar de forma manual los campos de descripción y de diagnóstico, o la otra es de selección de la plantilla la cual también debe de estar creada anticipadamente en el módulo de gestión de listas opción citologías.

Si seleccionas plantilla deberás de buscar y seleccionar la plantilla acorde a tus necesidades. La plantilla lo que hará es llenar los campos de descripción y diagnóstico de forma automática, pero los campos son editables para que puedas seguir editando la citología o quitar palabras que no corresponden a tus necesidades.

Ilustración 67 Búsqueda y selección de plantilla.

The screenshot shows a form titled "Usar Plantilla (Opcional)" with a search bar labeled "Buscar por Código" containing the text "LC001". To the right is a "Buscar" button and a dropdown menu labeled "O selecciona plantilla" which displays the selected option: "LC001 - posiblemente cancer es necesario realizar mas pruebas". Below this is a section titled "Descripción de la Muestra" containing two text areas: "Descripción" with the text "Se envia tejido de protuberancia en brazo derecho del paciente" and "Diagnóstico" with the text "posiblemente cancer es necesario realizar mas pruebas". At the bottom right are two buttons: "Cancelar" and "Guardar Citología".

Al finalizar la citología deberás de dar clic en el botón guardar citología la cual se guardará automáticamente.

Ilustración 68 Selección de acción guardar citología.

This screenshot shows the bottom portion of the form, specifically the two buttons at the bottom right: "Cancelar" and "Guardar Citología". The "Guardar Citología" button is highlighted with a red rectangular border.

Citologías Especiales

Ilustración 69 Citologías especiales.

¿Qué tipo de citología desea crear?

Seleccione el tipo para generar el número correlativo correspondiente

Normal
CN2025XXXX

Líquida
CL2025XXXX

Especial
CE2025XXXX

← Cancelar y volver

Damos clic en citologías especiales y automáticamente desplegará un formulario el cual deberás de llenar según corresponda, te explico los campos:

- Se te generará un código o id de citología dicho id estará relacionado al tipo de citología que hayas seleccionado por ejemplo CE= citología especial 2025= año de la creación y el correlativo de la citología.
- Tipo de citología: describirá el tipo de citología seleccionada.
- Fecha de recepción será la fecha en que ingresaste la citología
- Paciente: deberás de seleccionarlo por lo tanto el paciente deberá de existir en el módulo de gestión de pacientes personas explicado con anterioridad.
- Doctor: Deberás de escribir de forma manual el remitente o doctor debido a que son casos especiales
- Celular del remitente: deberás de editar de forma manual el numero de contacto del doctor o institución

Ilustración 70 Nueva citología persona.

Nueva Citología - Persona ✕

Número: CE202500002

Datos Básicos

Tipo de Citología: Citología Especial

Fecha de Recepción *: 05/11/2025

Cambiar tipo

Paciente *: Seleccionar...

Remitente Especial *: Nombre del remitente...

Celular del Remitente *: 12345678

En la parte Inferior tendrás dos opciones una es llenar de forma manual los campos de descripción y de diagnóstico, o la otra es de selección de la plantilla la cual también debe de estar creada anticipadamente en el módulo de gestión de listas opción citologías.

Si seleccionas plantilla deberás de buscar y seleccionar la plantilla acorde a tus necesidades. La plantilla lo que hará es llenar los campos de descripción y diagnóstico de forma automática, pero los campos son editables para que puedas seguir editando la citología o quitar palabras que no corresponden a tus necesidades.

Ilustración 71 Búsqueda y selección de plantilla.

Usar Plantilla (Opcional)

Buscar por Código

LC001

Buscar

O selecciona plantilla

LC001 - posiblemente cancer es necesario realizar mas pruebas

Descripción de la Muestra

Descripción *

Se envia tejido de protuberancia en brazo derecho del paciente

Diagnóstico *

posiblemente cancer es necesario realizar mas pruebas

Cancelar

Guardar Citología

Al finalizar la citología deberás de dar clic en el botón guardar citología la cual se guardará automáticamente.


Ilustración 72 Selección de acción guardar citología.

Cancelar

Guardar Citología


Módulo de Gestión de Listas

Ilustración 73 Modulo gestión de plantillas.

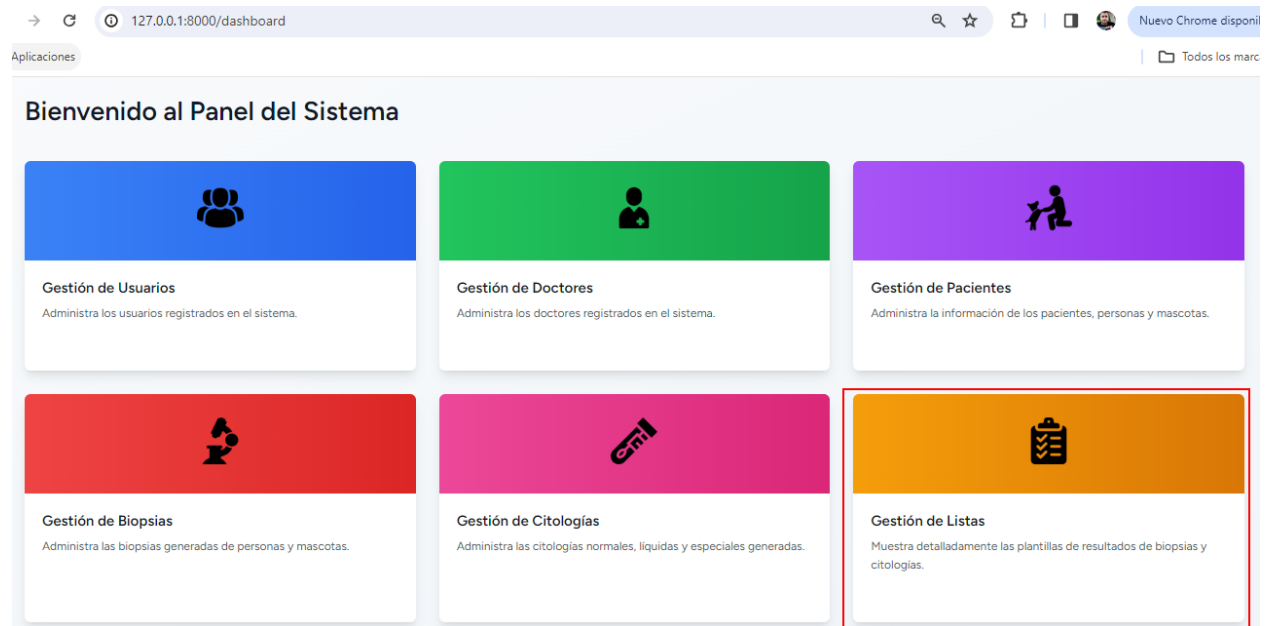

Dentro del módulo de gestión de listas encontraras las diferentes opciones, en donde podrá visualizar las plantillas creadas para biopsias, plantillas creadas para citologías, y la opción de impresión de sobres.

Ilustración 74 Selección de plantilla

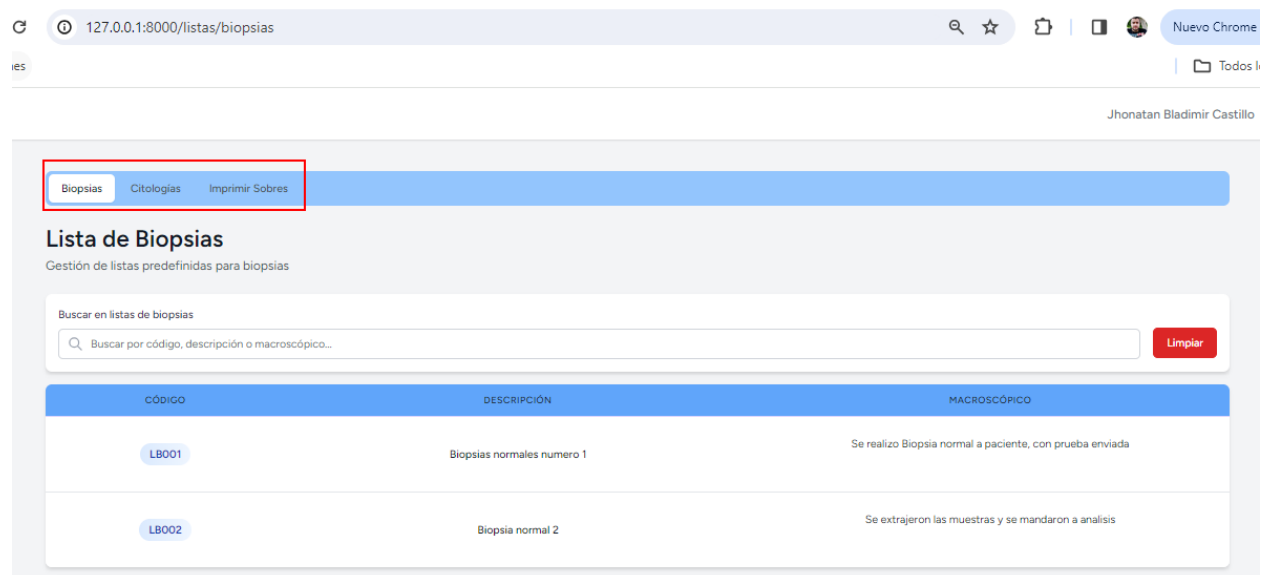

En la opción de biopsia encontraras todas las plantillas que servirán para la creación de las biopsias, visualizaras un filtro donde podrá buscar la plantilla que necesites, una descripción y el macroscópico. No podrás editar ni crear nuevas plantillas debido a que esa opción es exclusiva para el usuario administrador.

Ilustración 75 Plantilla biopsia.

The screenshot shows a web interface for managing biopsies. At the top, there is a navigation bar with three tabs: 'Biopsias' (highlighted with a red box), 'Citologías', and 'Imprimir Sobres'. Below the navigation bar, the title 'Lista de Biopsias' is displayed, followed by the subtitle 'Gestión de listas predefinidas para biopsias'. A search bar is located below the subtitle, with the placeholder text 'Buscar en listas de biopsias' and a red 'Limpiar' button. The search bar contains the text 'Buscar por código, descripción o macroscópico...'. Below the search bar, there is a table with three columns: 'CÓDIGO', 'DESCRIPCIÓN', and 'MACROSCÓPICO'. The table contains two rows of data. The first row has the code 'LB001', the description 'Biopsias normales numero 1', and the macroscopic description 'Se realizo Biopsia normal a paciente, con prueba enviada'. The second row has the code 'LB002', the description 'Biopsia normal 2', and the macroscopic description 'Se extrajeron las muestras y se mandaron a analisis'. The table is highlighted with a red box.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MACROSCÓPICO
LB001	Biopsias normales numero 1	Se realizo Biopsia normal a paciente, con prueba enviada
LB002	Biopsia normal 2	Se extrajeron las muestras y se mandaron a analisis

En la opción de Citologías encontraras todas las plantillas que servirán para la creación de las citologías y en donde visualizaras un filtro donde podrá buscar la plantilla que necesites, descripción y el diagnostico. No podrás editar ni crear nuevas plantillas debido a que esa opción es exclusiva para el usuario administrador.

Ilustración 76 Selección plantilla citologías.

127.0.0.1:8000/listas/citologías

Nuevo Chron

Todo

Jhonatan Bladimir Castillo

Biopsias **Citologías** Imprimir Sobres

Lista de Citologías

Gestión de listas predefinidas para citologías

Buscar en listas de citologías

Q Buscar por código, descripción o diagnóstico... Limpiar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIAGNÓSTICO
LC001	Se envía tejido de protuberancia en brazo derecho del paciente	posiblemente cancer es necesario realizar mas pruebas
LC002	Se reviso muestra del tejido estomacal para diagnostico	irritacion intestinal

En la sección de imprimir sobres este módulo podrás editar el doctor y el paciente para que puedas imprimirlo en el sobre

Ilustración 77 Selección de impresión de sobres.

Biopsias Citologías **Imprimir Sobres**

Impresión de Sobres

Selecciona un doctor o institución y opcionalmente un paciente para generar e imprimir el sobre.

Doctor y Paciente

Doctor * Ej: Dr. Juan Pérez

Paciente (Opcional) Ej: María López

Limpiar Generar e Imprimir

Instituciones

Nombre de la Institución * Ej: Hospital Nacional, Clínica Santa María, etc.

Limpiar Generar e Imprimir

La edición va a depender de lo que necesites es decir si en el sobre solo necesitas el doctor únicamente debes poner el nombre del doctor y le das generar e imprimir y quedara de la siguiente manera:

Ilustración 78 Impresión de sobres doctor

Formulario de impresión de sobres para el doctor. El formulario tiene un título "Doctor y Paciente" con un ícono de persona. Hay dos campos de texto: "Doctor *" con el valor "Alvaro Castilld" y "Paciente (Opcional)" con el valor "Ej: María López". Hay dos botones: "Limpiar" y "Generar e Imprimir".

Ilustración 79 Ejemplo de impresión de sobre doctor.

DR/A: ALVARO CASTILLO

Si necesitas también el paciente debes llenar ambos campos y puedes dar clic en generar e imprimir y quedara de la siguiente manera:

Ilustración 80 Selección de impresión sobre doctor y paciente.

Formulario de impresión de sobres para el doctor y paciente. El formulario tiene un título "Doctor y Paciente" con un ícono de persona. Hay dos campos de texto: "Doctor *" con el valor "Alvaro Castillo" y "Paciente (Opcional)" con el valor "maria lopez". Hay dos botones: "Limpiar" y "Generar e Imprimir".

Ilustración 81 Ejemplo de impresión de sobre doctor y paciente.

DR/A: ALVARO CASTILLO
PTE: MARIA LOPEZ

Si utilizas para citologías especiales puedes usar el apartado de Instituciones, en donde colocaras el nombre de la institución o remitente.

Ilustración 82 Impresión de sobres clientes especiales.

Instituciones

Nombre de la Institución *

Clínica Nueva Concepción


Limpiar Generar e Imprimir

Ilustración 83 Ejemplo impresión de sobre especiales.

CLÍNICA NUEVA CONCEPCIÓN


Centro de Ayuda

Ilustración 84 Centro de Ayuda

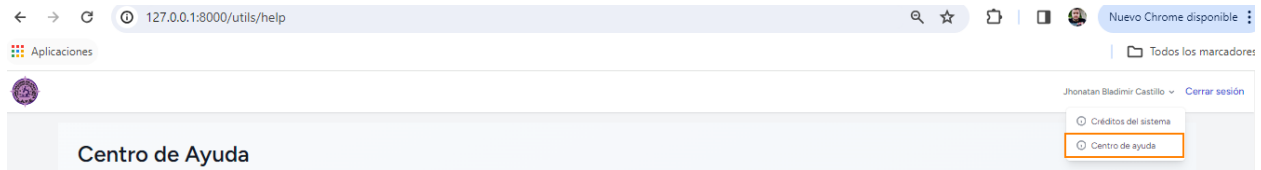


Si das clic en tu usuario en la parte superior derecha se desplegará una pestaña donde podrás encontrar el centro de ayuda en donde tendrás los videos tutoriales de cada módulo únicamente tienes que dar clic en el video que desees ver y te direccionará a YouTube

Ilustración 85 Videos de apoyo del sistema

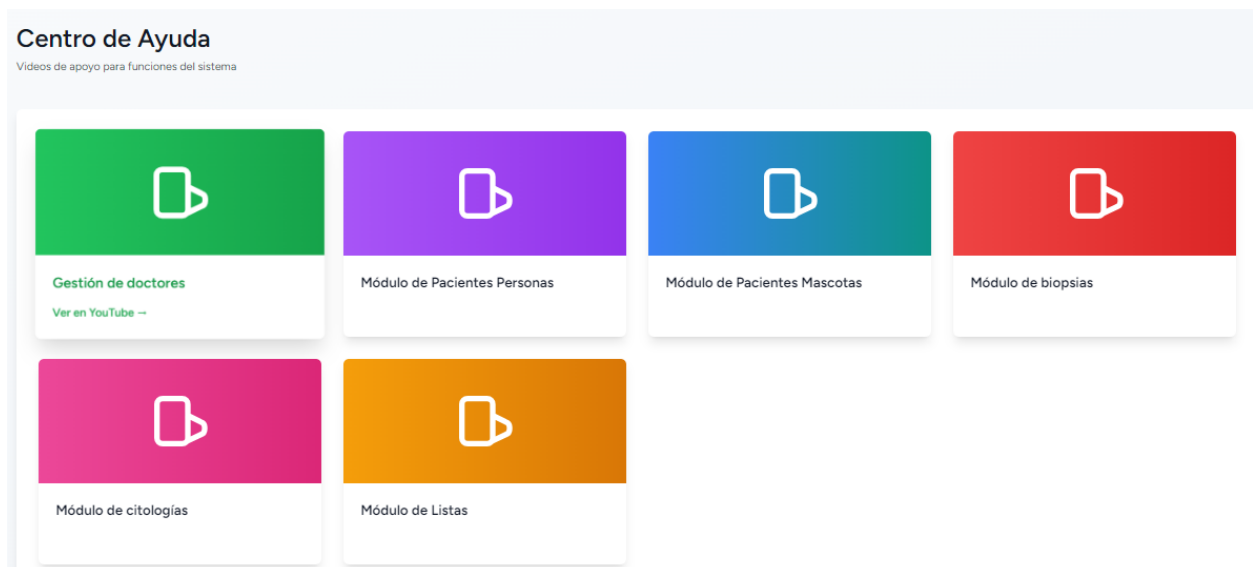

Créditos del Sistema

Ilustración 86 Créditos del sistema.

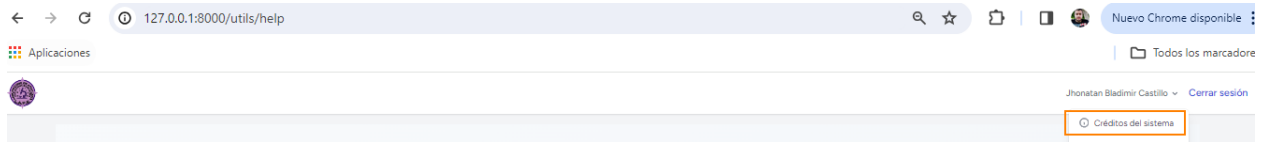

En la sección de créditos del sistema encontraras un apartado de créditos de nuestro equipo que colaboro en la creación de este sistema.

También encontraras los manuales de ayuda que son una guía para utilizar el sistema de forma optima y eficiente.

Ilustración 87 Créditos y manuales

Créditos del Sistema

